

# D DOCTOR AIR



3D MASSAGE SEAT **LITE** | 3Dマッサージシート LITE

洗練されたカラーバリエーション。

お部屋のインテリアにずっと溶け込むデザインとカラーバリエーション。



グレー (MS-03 GR)  
JAN:4580235555606




ベージュ (MS-03 BE)  
JAN:4580235555590

## ヒーターがついた光るもみ玉

ヒーターON/OFFに応じて、もみ玉が光ります。



ヒーター  
ON

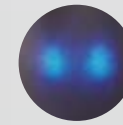

ヒーター  
OFF

## 使用目的又は効果

あんま、マッサージの代用。  
一般家庭で使用する。

疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる  
筋肉のこりをほくす  
神経痛・筋肉痛の痛みの緩解



## 製品仕様

販売名	3DマッサージシートLITE	もみ回数	35回/分(±10%)
型番	MS-03	もみ玉の移動速度	約1.3cm/秒(±3%)
類別	機械器具77バイブレーター	タイマー	15分(±10%)
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード:34662000)	使用環境温湿度	+10℃~+40℃ 30~85%RH
		保管環境温湿度	0℃~+40℃ 10~85%RH
医療機器の種類	管理医療機器	外形寸法	幅420mm×高さ1112mm×奥行き155mm (もみ玉部除く)
医療機器認証番号	230AHBZX00005000	質量	約4kg(本体のみ)
販売価格	19,800円(税込)	付属品	緩衝シート、ACアダプター
JANコード	グレー (MS-03 GR):4580235555606 ベージュ (MS-03 BE):4580235555590		取扱説明書(保証書付)
電源	AC100V 50Hz/60Hz	原材料	ABS、ポリエステル、ポリウレタン
定格消費電力	24W(負荷時 ヒーターのみ:4W)	製造国	中国
消費電力	10.5W(無負荷時)		

※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。

インテリアに溶け込む

スタイリッシュなデザイン

洗練された3Dマッサージシート




## 01. 体格を選ばない ロングストローク構造

約60cmのロングストロークが、肩から背中、腰、お尻までしっかりカバー。コリを感じやすい部位をトータルにもみほくします。さらにもみ玉の上下移動ボタンで、もみ玉が動く範囲を指定できるので、体格を選ばずどなたでも「ちょうど良い位置」で快適にマッサージをお楽しみいただけます。



## 02. 座面の クッション性アップ

座面のクッション性を高め、よりリラックス感のある使い心地になりました。約7cmの座面は厚みのある十分なクッション仕様となっており、座った時のストレスを感じさせません。身体にフィットし、より充実したマッサージタイムを体験できます。

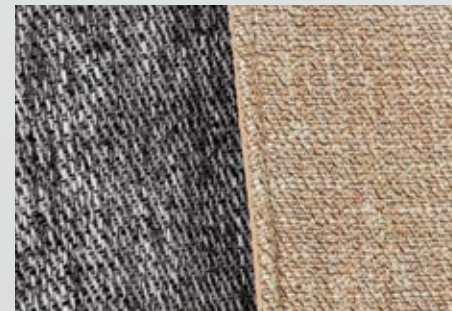

## 03. インテリアに溶け込む ファブリック

よりインテリア性を重視して、洗練された良質なツイード生地を使用しています。ツイード生地ならではの柔らかな色彩と味わいのある生地感が魅力です。主張しすぎずお部屋に溶け込み、どんなお部屋にも馴染みやすいのが特長です。



## 04. 本体重量約4kg 持ち運びらくらく

高いマッサージ性能を備えながらも、本体重量約4kg。女性一人でもかんたんに持ち運びでき、リビングだけでなくお好きな場所へ持ち運ぶことができます。いつもの場所だけでなく、様々な場所で快適なマッサージをお楽しみいただけます。

# シンプルで使いやすい。 リモコンで直感的に操作できます。

快適なマッサージ機能とスタイリッシュな軽量コンパクトボディを兼ね備え、発売以来大ヒットの3Dマッサージシートシリーズ。安定したもみ玉パワーやヒーター機能などはそのままに、デザイン性や使い勝手にも改良を加え、どんなシーンでも使いやすくなりました。



## 搭載機能

### 選べる3モード

モードボタンを押すたびに運転コースが下記のように切り替わり、選択されているコースのランプが点灯します。コリを感じる部位を重点的にマッサージできます。

全身 ▶▶ 上部(肩) ▶▶ 下部(腰)

### ヒーター機能

ヒーターボタンを押すと右横のランプが点灯し、ヒーターONとなりもみ玉は赤くなります。もう一度ヒーターボタンを押すことでヒーターはオフになります。

### 一目でわかるシンプルな3つのボタン



電源ボタン (ON/OFF)



モードボタン



ヒーターボタン

### もみ玉位置の固定・変更

#### ●もみ玉固定ボタン

自動運転が解除されて、もみ玉の自動的な上下運動がなくなります。

#### ●上移動ボタン・下移動ボタン

ボタンを長押しし、もみ玉が希望の位置にきたらボタンを離してください。もみ玉の位置を固定できます。

### 緩衝シートで強さ調整

マッサージの強さをソフトにしたい場合は、緩衝シートを取り付けることにより、強さをやわらげることができます。お好みの強さに調整いただけます。

ドクターエアお客様相談窓口

0120-05-8000

受付時間 / 10:00~18:00 年中無休 (年末年始除く)



取り扱い店舗情報などは

ドクターエア 検索

直営店舗をはじめ、全国の有名百貨店や家電量販店などでご体感いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。



## BODY CARE STORE

### ⚠️ 使用上の注意

ご使用前に必ず製品同梱の取扱説明書をお読みください。

#### ◎次の方は、絶対に使用しないこと。

乳幼児や小さなお子さま、自ら意思表示ができない方や操作行えない方、医師からマッサージを禁じられている方(例: 心臓疾患、急性疾患、有熱性疾患、血圧異常、血栓(塞栓)症、重度の静脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症、けいつい(頸椎)症、飲酒や薬を服用中の方、化学繊維でかぶれた経験のある方・健康が特にすぐれない方・疲労が激しい方など)

#### ◎次の部位に使用する方は、必ず医師との相談のうえ、使用すること。

整形手術をした部位・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位・皮膚トラブルのある部位(例: アトピー性皮膚炎、顔面黒皮症、皮膚の炎症、かゆみやほてりのある部位、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など)・感覚、知覚障害を起している部位・胸部・陰部・頭部・骨折部位・背骨部位・関節部位

#### ◎次の方は、必ず医師との相談のうえ、使用すること。

ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している方・悪性腫瘍のある方・心臓に障害のある方・脚部に重度の血行障害がある方・温度感覚喪失が認められる方・妊娠中または、妊娠の可能性のある方・出産直後の方・糖尿病など、高度の末しょう循環器障害による知覚障害のある方・皮膚に創傷のある方、安静を必要とする方や、体力の衰えた方・体温が38°C以上(有熱期)の方(例: 急性炎症症状=倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき・骨粗しょう症、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の方・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する方・腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの方・背骨に異常がある方、または背骨が左右に曲がっている方・医師の治療を受けている方や、上記以外に特に身体の異常を感じている方

その他の禁止事項、注意すべき事柄は、製品付属の取扱説明書をお読みください。

■写真やイラストはすべてイメージです。

■製品仕様およびそのデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。

株式会社ドリームファクトリー 商品管理センター  
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビル16F

MS03-181122