


フットマッサージャー MF-001

取扱説明書

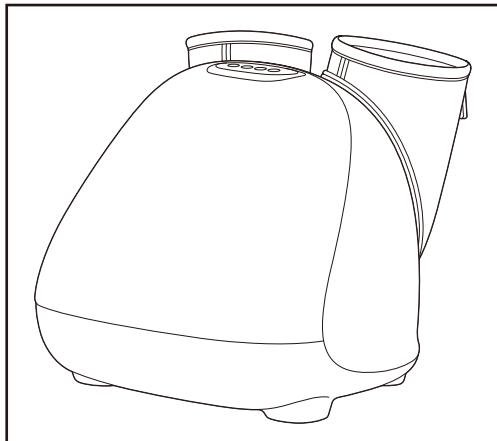

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

もくじ

● 安全上のご注意	1 ~ 4
● 各部の名称	5
● ご使用の前に	6
● 使いかた	6
● 使用例	7
● 使用上のご注意	7
● お手入れについて	7 · 8
● 保管について	8
● 故障かなと思ったら	8
● 愛情点検について	9
● 仕様	9
● アフターサービスについて	10 · 11
● メモ	12 · 13
● 無料修理規定	14

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



●記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



強制

医師の治療を受けているときや次の人には必ず医師に相談のうえ使用する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠中や出産直後の
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38°C以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血压変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
 - 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
 - かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
 - 本品を使用しても効果がみられない人
 - その他医療機関で治療中の
- 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

 強制	<p>使用前に必ずエアーバッグ部の張地が破れていないか確認する。 (どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) 守らないとけがや感電のおそれがあります。</p>
	<p>交流100Vで使用する。 守らないと火災や感電の原因になります。</p> <p>次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。 (例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させるおそれがあります。</p> <p>電源プラグにホコリが付着しないよう定期的に掃除する。 守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災のおそれがあります。</p>
 禁止	<p>ふくらはぎおよび足のマッサージ以外の目的には使用しない。 事故やけがのおそれがあります。</p> <p>強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛める原因になります。</p> <p>子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。 子供に本品で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 事故やけが、故障のおそれがあります。</p> <p>使用中は立ち上がらない。エアーバッグ部に足を入れたまま移動しない。 転倒による事故やけが、故障のおそれがあります。</p> <p>本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。</p> <p>電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口に修理を依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。</p> <p>電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口に連絡する。電源コードが破損した場合、危険なため電源コードの交換はお買い上げ販売店またはお客様相談窓口に交換の依頼をする。</p> <p>機器は改造しない。 火災や感電、けがの原因になります。</p>




安全上のご注意

⚠ 注意

 強制	1回の使用時間は10分以内にする。 守らないと逆効果やけがのおそれがあります。
	はじめは短い時間で使用する。 強い刺激に慣れていないと逆効果やけがのおそれがあります。
	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
	使用前に必ず布力バーの中に異物がないことを確認する。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
	使用後は停止ボタンで動作を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
	電源プラグを抜くときは、接続部に無理な力をかけないよう 必ず電源プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショートのおそれがあります。
	故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
 禁止	次のようなときは使用しない。 <ul style="list-style-type: none">● 疲労が激しいとき● 酒に酔っているとき● 湿疹が生じているとき 体調不良をおこすおそれがあります。
	食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。
	他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。
	使用中は眠らない。 事故やけがのおそれがあります。
	フトンの中や、毛布をかいぶせて使用しない。 発火や感電の原因になります。

 禁止	<p>肌の弱い人は素肌で使用しない。 摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。</p>
	<p>長い爪の人は使用しない。 ローラーに接触して爪が割れるおそれがあります。</p>
	<p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 火災のおそれがあります。</p>
	<p>アクセサリーなどの硬いものをつけて使用しない。 エアーバッグ部に接触して事故やけが、故障のおそれがあります。</p>
	<p>落としたり、強い衝撃をあたえない。 事故やけが、故障の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色、変形の原因になります。</p>
	<p>使用中に電源プラグを抜かない。 けがのおそれがあります。</p>
 水場使用禁止	<p>浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。</p>
 電源プラグを抜く	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災のおそれがあります。</p>
	<p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手でプラグにふれない。 守らないと感電ややけどのおそれがあります。</p>
	<p>停電のときは電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>

各部の名称

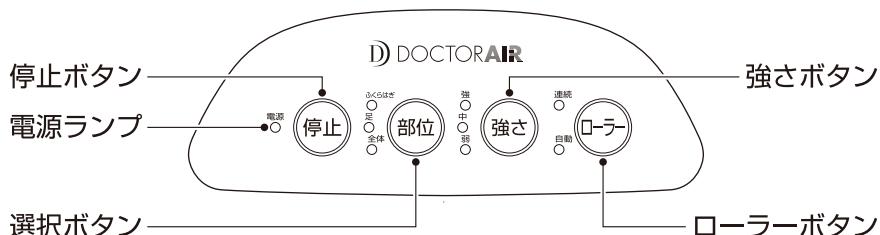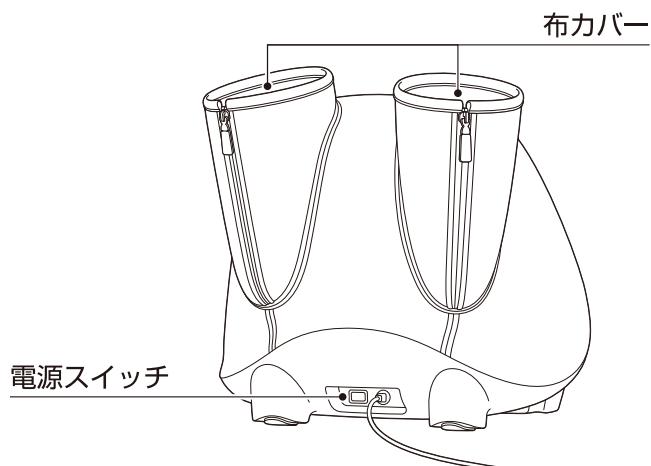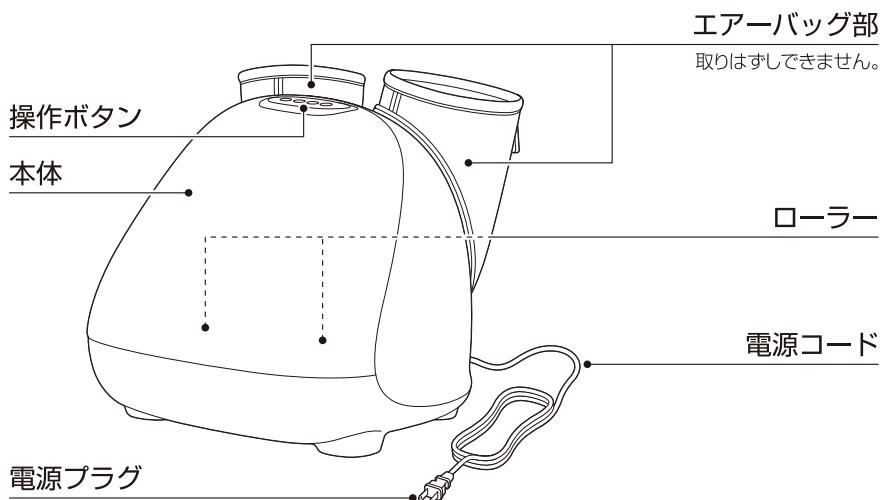

ご使用の前に

- 電源プラグが確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。
- エアーバッグ部の張地が破れていないか確認してください。
- 長い爪の人は短く切ってから使用してください。
- 布カバーの中に異物がないことを確認してください。
- 布カバーに足を入れた際に、かかとや指先にダブつきがないことを確認してください。
- エアーバッグが動作している状態でファスナーを開閉しないでください。
またファスナーは上まで閉じて使用してください。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。

使いかた

- 使用中の動作音をやわらげるとともに床を傷つけないためにマットなどを敷くことをおすすめします。
- キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。

1.電源プラグをコンセントに差してください。
(電源コードが抜け落ちないよう確実に接続する)

2.本体後面にある電源スイッチを「ON」にしてください。
電源ランプが点灯します。

3.エアーバッグ部のファスナーを下ろし足を入れ、ファスナーを上げてください。

4. **部位**ボタンを押すと部位[全体]、強さ[弱]、ローラー[自動]を開始します。

部位ボタンを押すごとに[足] [ふくらはぎ] [全体]の順番に切り替わります。

強さボタンを押すごとに[中] [強] [弱]の順番に切り替わります。

ローラーボタンを押すごとに[連続] [停止] [自動]の順番に切り替わります。

ローラーは単独でも操作ができます。

5.マッサージを終了したいときは**停止**ボタンを押してください。
動作が止まります。



6.電源スイッチを「OFF」にしてください。電源ランプが消灯します。

7.電源プラグをコンセントから抜いてください。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。

使用例

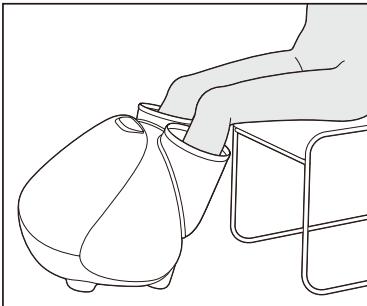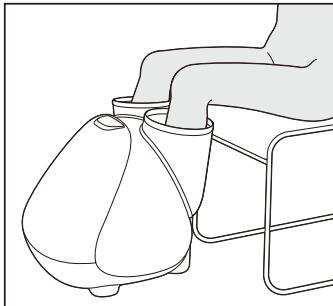

傾けて使用できます。

使用上のご注意

- 整髪料・化粧品などの薬品を接触させないでください。
化学変化による生地の変色や劣化の原因になります。
- 直射日光を毎日長時間あてないでください。
生地の変色や劣化の原因になります。
- ビニールや室内の壁紙などに長時間接触させないでください。
生地が変色する原因になります。


お手入れについて

■本 体 —— 乾いた布で汚れをふき取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

■布カバー —— ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってから
ふき取ってください。

布カバーの足先部はご家庭で洗濯
できます。

ファスナーでセットされています。

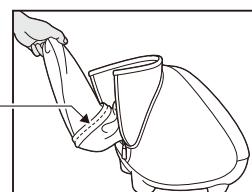



■洗濯機で洗う場合

1.40°C以下の液温で洗ってください。

ご注意 生地が傷みやすいので洗濯ネットをご使用ください。
漂白成分が入っている洗剤は色落ちしますので使用しないでください。
乾燥機(乾燥機能)は使用しないでください。

2.軽くしわをのばし、陰干しする。

ご注意 天日干しすると生地の縮みや色あせの原因になります。

■ドライクリーニングに出す場合

クリーニング店にて、ドライクリーニング(セキユ系)との依頼をしてください。

保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、
ホコリがつかないようにしてください。

故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口に点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
●エアーマッサージ中の音 加圧および減圧の音 張地のする音(パリパリ音)	●構造上発生するもので機能に影響はありません
●動作しない	●電源プラグが抜けていませんか ●電源スイッチが「OFF」になっていませんか ●オートタイマーが働き停止状態になっていますか

上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。
電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口に点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



愛情点検

このような症状はありませんか。

- こげくさいにおいがする
- 電源コード、プラグが異常に熱い
- コードを動かすと通電したりしなかつたりする
- その他異常がある



故障や事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様相談窓口に点検、修理をご相談ください。

仕様

販売名	フットマッサージャー MF-001
医療機器認証番号	228AKBZX00072000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	40W
定格時間	20分
エアー圧力	60kPa以下
足裏たたき回数	約64回/分～約128回/分
オートタイマー	約10分
外形寸法	幅 約43cm×奥行 約43cm×高さ 約41cm
質量	約6kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体: ABS樹脂、合成皮革 布カバー: ポリエステル
医療機器製造販売業	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055
販売元	株式会社ドリームファクトリー

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

- 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理いたします。

- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

- 補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。

部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。

保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

- その他ご不明な場合

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または

お客様相談窓口にお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしたがってください。

お客様相談窓口のご案内

商品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

| ドクターエアお客様相談窓口 |

フリーダイヤル  **0120-05-8000**

受付時間 10:00～18:00 / 年中無休(年末年始除く)

| 販売元 |

株式会社ドリームファクトリー

〒530-0001 大阪市北区梅田1-12-17
梅田スクエアビル16F

<http://dreamf.co.jp>

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

メモ

メモ

無料保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料(往復共)などはお客様のご負担となります。
※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けになれない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - (2) 不当な修理や改造による故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - (4) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
 - (5) 保証書のご提示がない場合
 - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (7) 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
 - (8) 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - (9) 弊社(および弊社関連会社)以外で誤った修理をしたり、改造のために生じた故障および損傷
 - (10) 消耗品、本体以外の付属品の消耗
 - (11) 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

修理メモ

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

ドクターエアお客様相談窓口

フリーダイヤル  0120-05-8000

受付時間 10:00~18:00/年中無休(年末年始除く)

販売元

株式会社ドリームファクトリー

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビル16階

<http://dreamf.co.jp>

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38

2016年9月10日 第1版発行