




DOCTORAIR

3DフットマッサージャーS

添付文書

# 取扱説明書

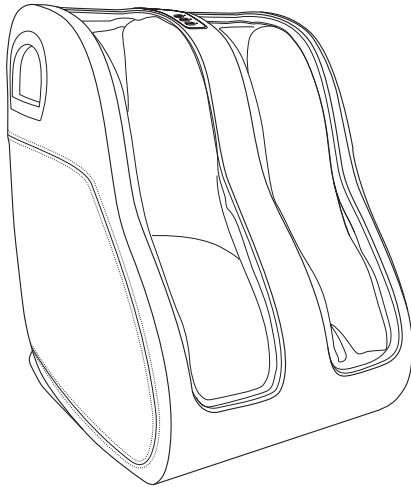

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

株式会社ドリームファクトリー

## 目次

安全上のご注意	3~5
・警告	3~4
・注意	5
性能及び安全性に関する規格	5
使用目的又は効果	6
各部の名称とはたらき	6~7
ご使用前の準備	7
ご使用方法	8~10
・マッサージを始める前に	8
・マッサージを始める	8~10
表面カバーの取り外しかた	10
お手入れと保管について	11
・お手入れ方法	11
・保管方法	11
廃棄のしかた	12
故障かなと思ったら	12
製品仕様	13
保証とアフターサービス	14
MEMO	15

## 安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

### 警告・注意について

誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



**警告**

誤った取り扱いをすると、死亡や重症を負う恐れがある内容を示しています。



**注意**

誤った取り扱いをすると、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

### 図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



分解禁止

⊘はしてはいけない「禁止」内容を示しています。  
⊙の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示しています。  
左の図記号は「分解禁止」を意味します。



電源プラグを抜く

●は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。  
●の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示しています。  
左の図記号は「電源プラグを抜く」を意味します。

## 警告



禁止

- 本製品は家庭用マッサージ器です。他の目的には使用しないでください。
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。症状を悪化させる原因になります。例:心臓疾患、急性疾患、有熱性疾患、血圧異常、血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)、けいつい(頸椎)症、飲酒や薬を服用中の方、化学繊維でかぶれた経験のある方、健康が特にすぐれない方、疲労が激しい方など。
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方は使用しないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。
- 本製品は脚部専用です。他の部位には使用しないでください。
- 通電したまま放置しないでください。焼損の原因になります。
- 電源コードを本体に巻き付けしないでください。
- 布団や毛布をかぶせて使用しないでください。



必ず守る

- 次の方は必ず医師とご相談の上、使用してください。
  - ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している方
  - 悪性腫瘍のある方
  - 心臓に障害のある方
  - 脚部に重度の血行障害がある方
  - 妊娠中や出産直後の方
  - 糖尿病など、高度の末しょう循環器障害による、知覚障害のある方
  - 治療部位に創傷のある方
  - 安静を必要とする方や体力の衰えた方
  - 体温38℃以上(有熱期)の方
  - 例:急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき
  - かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する方
  - 腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの方
  - 背骨に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方
  - 医師の治療を受けている方や、上記以外に特に身体の異常を感じている方
- ご使用前に必ず布地が破れていないか確認してください。どんな小さな破れでも見つけた場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。感電やケガの原因になります。

# 警告

<p>●本体に足を入れたまま立ち上がったり、下図のような使い方をしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下記の位置に足を乗せて使用しないでください。</li> <li>・本製品に足を乗せたまま立たないでください。</li> </ul>  <p>・本製品を横にしたり倒したりして使用しないでください。</p>  <p>●本製品を踏み台などの用途で使用しないでください。</p> <p>●足裏のローラーに足を強く押し付けたりしないでください。</p> <p>●マッサージ器本体のカバーを故意に外したり、破れた状態で使用することは非常に危険ですので、絶対にしないでください。</p> <p>●お子様に本体で遊ばせたり、乗らせたり、一人で使わせたりしないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。</p> <p>●本体を倒したり、強い衝撃を与えないでください。事故や故障の原因になります。</p> <p>●ストーブなどの火気の近くやホットカーペットなどの暖房器具の上に設置しないでください。また、タバコを吸いながらのご使用はおやめください。火災の原因になります。</p> <p>●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。絶縁不良になり、火災、感電、ショートによる発火の原因になります。</p> <p>●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。火災の原因になります。</p> <p>●ご使用中はほかの作業を行わないでください。事故やケガの原因になります。</p> <p>●機器の隙間にピンやゴミなどを差し込まないでください。火災や感電の原因になります。</p> <p>●電源コードや電源プラグを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。</p>	<p>●本体および電源コードから異常音や異臭、煙が発生したら、直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。そのまま使用を続けると火災や感電、事故の原因になります。</p> <p>●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるいときは、直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。火災や感電の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>電源プラグを抜く</p>  <p>水場禁止</p> 
	<p>ぬれ手禁止</p>  <p>●本製品は防水ではありませんので、濡れた手で本製品や電源コードおよび電源プラグに触れないでください。感電の原因になります。</p>
	<p>分解禁止</p>  <p>●本製品の分解・改造は絶対にしないでください。発火や事故、故障の原因になります。</p>
	<p>必ず守る</p>  <p>●ご使用前に主電源スイッチや各ボタン、タイマーが正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。</p> <p>●ご使用中に身体に異常があらわれたり感じたりした場合や、使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす原因になります。</p> <p>●電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。</p> <p>●異常が発見されたときは、そのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。</p> <p>●次の部位には使用する際は必ず医師にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●整形手術をした部位</li> <li>●皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位</li> <li>●皮膚トラブルのある部位/例:アトピー性皮膚炎、顔面黒皮症、皮膚の炎症、かゆみやほてりのある部位、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など</li> <li>●痛覚、知覚傷害を起こしている部位</li> <li>●胸部・陰部・頭部・骨折部位・背骨部位・関節部位</li> </ul>

## ⚠ 注意



必ず守る

- 健康な方でも、次の方は必ず医師とご相談の上、使用してください。  
●打ち身やねんざのしやすい方●加齢により、筋肉の衰えた方や痩身の方●過去に心臓や内臓の手術を行った方●骨や内臓に起因する腰痛の方●乗り物酔いの激しい方
- 使用時間は1回 20 分以内にしてください。長時間使用すると逆効果やケガの原因になります。
- 長期間ご使用にならなかった場合は、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してから使用してください。事故やケガの原因になります。
- 食前・食後のご使用は、十分に時間をあけてから使用してください。
- 本製品の使用により発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。体調不良の原因になります。
- ご使用の際は椅子などに腰掛けてご使用ください。その際は、キャスター付きの椅子や回転椅子はお避け下さい。
- エアバッグから空気が完全に抜けていることを確認してから足を入れてください。ケガの原因になります。
- マッサージ器本体が直接肌に触れてのご使用はおやめください。
- マッサージ中に本体から足を抜く際は、必ず動作を停止し、エアバッグから空気が完全に抜けたことを確認してから足を抜いてください。ケガの原因になります。
- 本体を持ち運ぶ際は取っ手をしっかりとってください。落下によるケガ、破損の原因になります。
- 本体に異物が挟まっていないか確認してから足を入れてください。



電源プラグを抜く

- ご使用にならないときは主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。湿気、ホコリなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。
- 本製品を移動する際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 停電したときは直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 雷が鳴り始めたら、主電源を切り、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れをする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。感電や事故の原因になります。



禁止

- 他の治療器と同時に使わないでください。事故や体調不良の原因になります。
- 足の裏や足首、ふくらはぎのマッサージ以外の目的で使用しないでください。ケガや体調不良の原因になります。
- 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。事故やケガの原因になります。
- ご使用中の飲食はおやめください。
- 湿疹が出ているときのご使用はおやめください。
- ご使用中に眠らないでください。事故やケガの原因になります。
- ご使用中に主電源を切ったり電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。
- 同時に複数人での使用はおやめください。
- アクセサリーなどの硬いものをつけたまま使用しないでください。ケガの原因になります。
- 本体の上に乗ったり、座ったり、立ったりしないでください。転倒によるケガや故障の原因になります。
- 水平で安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置すると、本体が倒れ、事故やケガ、故障の原因になります。
- 表面カバーを洗濯の際は洗濯機を使用しないでください。

## ■ 性能及び安全性に関する規格

### 1. 性能

項目	仕様	備考
圧迫機能の空気圧：圧迫機能をもつ家庭用電気マッサージ器及び家庭用エアマッサージ器	50kPa (±10%)	試験方法：JIS T 2002:2006 6.2項

### 2. その他の性能


項目	仕様	備考
タイマー	20分 (±10%)	試験方法：JIS T 2002:2006 6.5項

## ■使用目的又は効果


あんま、マッサージの代用を目的として一般家庭で使用する。  
※上記以外の目的には使用しないでください。

## ■各部の名称とはたらき


### 【本体】

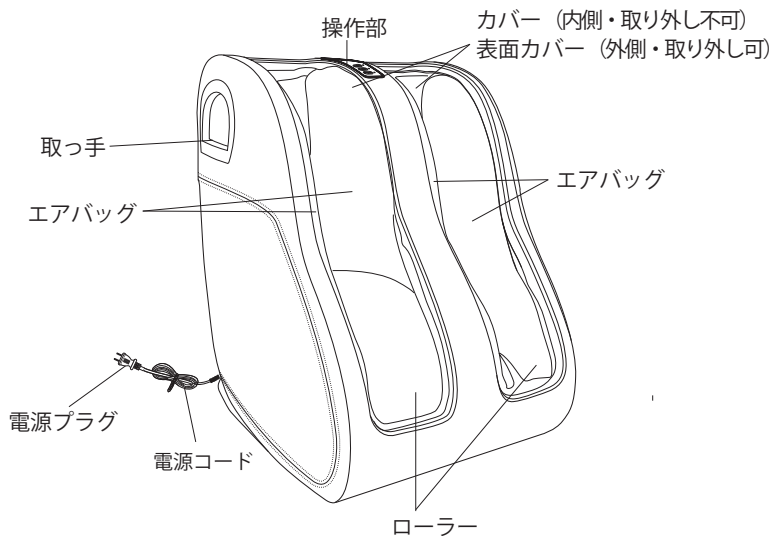


### 【本体背面】

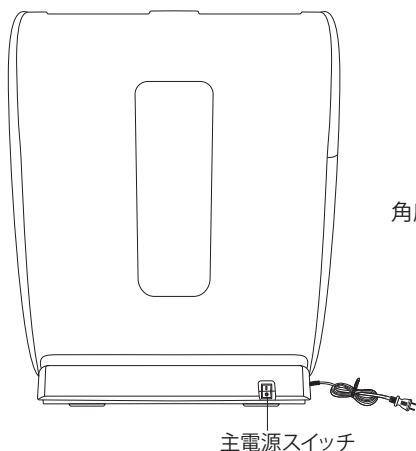

### 【本体底面】

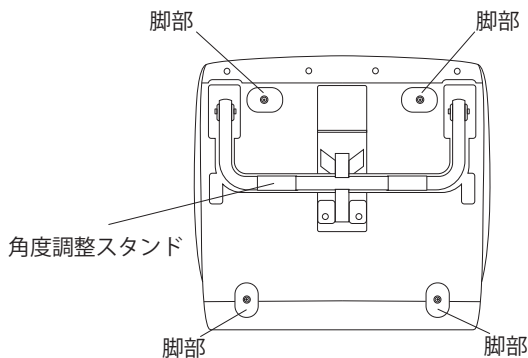

## 【操作部】

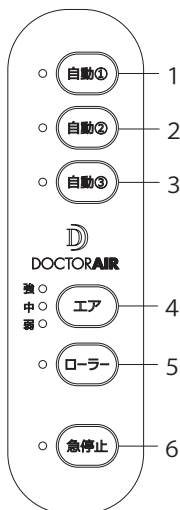

1. 自動①ボタン……足裏のローラーとエアバッグで、足裏、ふくらはぎ全体をマッサージします。
2. 自動②ボタン……足裏のローラーとくるぶし部分のエアバッグで、足首から下をマッサージします。
3. 自動③ボタン……エアバッグでふくらはぎ全体をマッサージします。自動③のコースはローラーは動作しません。
4. エアボタン……エアバッグの強さを調節できます。  
弱(エアバッグON) ⇒ 中 ⇒ 強 ⇒ エアバッグOFF
5. ローラーボタン…足裏のローラーだけが動作します。ローラー動作中にボタンを押すとローラーが停止します。
6. 急停止ボタン……急停止ボタンを押すと、エアが抜け、全ての動作が終了します。スタンバイモードは解除されます。

### ※エネオンキーシステム

急停止ボタン以外のどのボタンを押しても電源が入りスタンバイモードになります。

## ■ご使用前の準備

### 設置場所について

- 水平で安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置すると、本体が倒れ、事故やケガ、故障の原因になります。
- 柔らかいフローリングやたたみなど、設置場所によっては設置跡や傷がつく恐れがあります。必要に応じ、床表面に本製品が直接あたらないよう、マットなどを敷いてください。その際、ホットカーペットはお避けください。
- テレビやラジオなどの映像/音響機器から1mほど離して設置してください。雑音が入る場合があります。
- ストーブなどの火気の近くやホットカーペットなどの上に設置しないでください。火災の原因になります。
- 浴室などの湿気の多い場所、屋外などでは使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や、極端な高温多湿になるところには設置しないでください。
- 本製品を移動する際は取っ手を持って、両手で持ち上げて運んでください。本製品を引きずって移動すると床や畳などを傷つける原因となりますのでおやめください。
- 本製品を移動する際は角度調整スタンドをたたみ、電源コードや電源プラグは引きずらないようにしてください。


## ■で使用方法

### マッサージを始める前に


- ご使用前に必ずカバーに破れなどの異常がないか確認してください。異常が発見されたときは、そのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- ご使用前にエアバッグやローラーの隙間などに異物がないか、ご確認ください。
- ご使用前に、主電源スイッチ、各ボタンやタイマー機能が正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。
- 本体に異物が挟まってないか手で触れて確認してからご使用ください。
- 表面カバーを必ずファスナーで取り付けてからご使用ください。

### マッサージを始める

- ①電源プラグを家庭用コンセントに根元までしっかりと差し込みます。

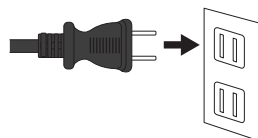


- ②本体背面にある主電源スイッチを「|」の方向に切り替え、主電源を入れます。主電源が入ると、急停止ボタン横のランプが赤色に点滅します。

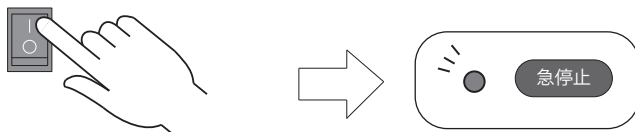

- ③急停止ボタン以外のいずれかのボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り、スタンバイモードになります。スタンバイモードになると、急停止ボタン横のランプが赤色に点灯します。
- ④本体に足を入れます。必ず椅子などに座ってご使用ください。  
※キャスター付きの椅子などは使用しないでください。


### ⚠ 注意

- 素足では使用しないでください。
- 爪の長い人は使用しないでください。

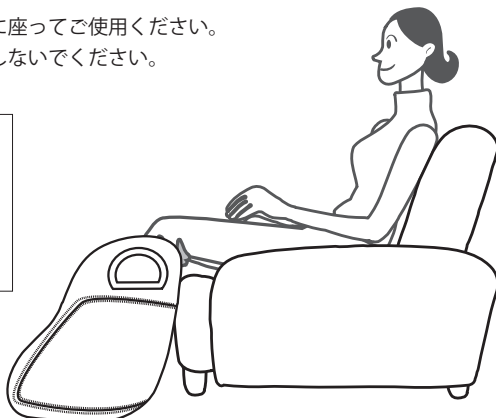



角度調整スタンドで本体の角度をつけることができます。スタンドは最後までしっかりと開いてご使用ください。  
※スタンドの開閉の際は、手や指などを挟まないようご注意ください。

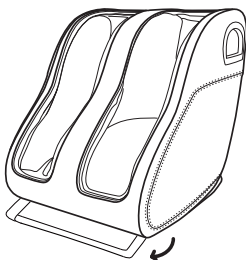



- ⑤自動コースボタンのいずれか、もしくはローラーボタンを押すと、マッサージが開始されます。  
※エネオンキーシステム：急停止ボタン以外のどのボタンを押しても電源が入りスタンバイモードになります。

#### 【自動コースの内容】

- 自動①** 自動①コース  
足裏のローラーとエアバッグで、足裏、ふくらはぎ全体をマッサージします。
- 自動②** 自動②コース  
足裏のローラーとくるぶし部分のエアバッグで、足首から下をマッサージします。
- 自動③** 自動③コース  
エアバッグでふくらはぎ全体をマッサージします。自動③のコースはローラーは動作しません。
- ローラー** 足裏のローラーだけが動作します。ローラー動作中にボタンを押すとローラーが停止します。

- ⑥約 20 分後に自動でマッサージが終了します。急停止ボタンを押してもマッサージが終了します。  
エアバッグから空気が完全に抜けてから、本体から足を抜いてください。

- ⑦主電源スイッチを「0」の方向に切り替え、主電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。

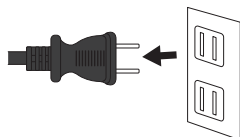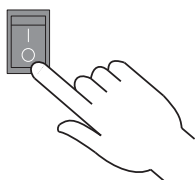

#### ⚠ 注意

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

＜マッサージ中の動作を調節したいときは＞

- エアの強さを調節する/エアをON/OFFする。  
エアボタンでエアの強さを調節できます。エアの強さは3段階から調節できます。ボタンを押すごとに、弱⇒中⇒強⇒OFFの順に切り替わります。  
※選択されている強さが赤色に点灯します。エアがOFFの場合は消灯します。
- ローラーをON/OFFする  
ローラーボタンでローラーのON/OFFが行えます。  
自動①、②、③のすべてのコースでローラーのON/OFFができます。  
ローラーがONになるとローラーボタン横のランプが赤色に点灯し、OFFになると消灯します。

＜途中でコースを変更するときは＞

- マッサージ中でも、他のコースに切り替えることができます。使用したいコースのボタンを押してください。  
※途中でコースを切り替えても、タイマーはリセットされません。


＜マッサージを途中で終了するときは＞

- 途中でマッサージを終了する場合や、異常を感じた場合は急停止ボタンを押してください。  
自動的にエアバッグから空気が抜け、全ての動作が終了します。スタンバイモードは解除されます。
- 再度マッサージを行う際は、いずれかのボタンを押して、スタンバイモードにしてからコースを選択してください。  
※選択中のコースボタンを押しても、動作は終了します。

## ■表面カバーの取り外しかた


ファスナーで表面カバーの取り外しができます。

表面カバーには右足用、左足用があります。取り付ける際は洗濯表示をご確認ください。

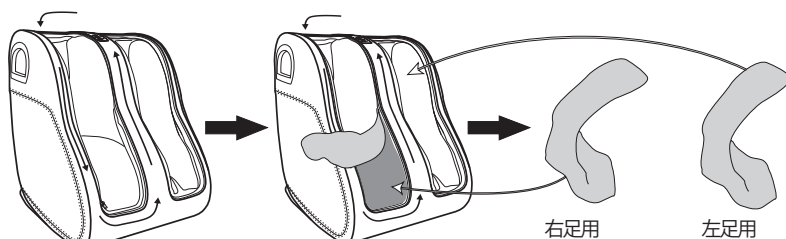

※洗濯表示の左上に左右の表示を記載しています。

〈表示例〉

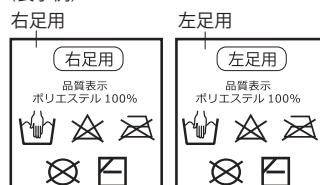

### ⚠ 注意


- 表面カバーの下にあるカバーを取り外さないでください。故障や事故の原因になります。
- 表面カバーを外したままご使用にならないでください。
- 表面カバーを取り付ける際は、最後までしっかりとファスナーを閉じてください。
- 表面カバーは左足用、右足用とございます。取り付けの際は洗濯表示に記載されている左右をご確認のうえ、取り付けてください。

## ■お手入れと保管について

### お手入れ方法

#### 本体

- お手入れをする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。感電や事故の原因になります。
- 汚れがひどい場合は、水で濡らしてかたく絞ったスポンジや、やわらかい布でふき取ってください。その後乾いた布で乾ぶきしてください。

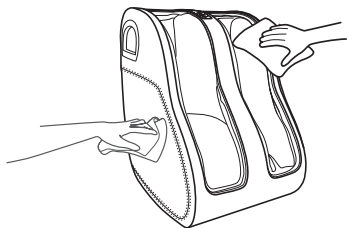

#### ⚠ 注意

- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 洗濯の際は洗濯機を使用しないでください。

#### 表面カバー

表面カバーを取り外し、洗濯の際は手洗いしてください。

- 蛍光剤、漂白剤の入っていない洗濯用洗剤でやさしく押し洗いしてください。よくすすいだ後、軽く絞って形を整え、陰干ししてください。
- ドライクリーニングやタンブラー乾燥はおやめください。詳しくは表面カバーに付いている洗濯表示をご確認ください。

### 保管方法

- 汚れやほこりを取ったあと、浴室などの湿気の多い場所、屋外、高温高湿になる場所や直射日光の当たる場所、乳幼児や小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所を避けて保管してください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、カバーや袋などをかけて保管してください。

#### ⚠ 注意

- 本製品を浴室などの湿気の多い場所や、屋外などで使用したり保管したりしないでください。感電や故障の原因になります。

## ■ 廃棄のしかた

- 本製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従い、廃棄してください。
- 詳しくはお住まいの地方自治体にお問い合わせください。

## ■ 故障かなと思ったら

### 動作中発生する音や感覚について

ご使用中に下記のような動作音や感覚がありますが、構造上のもので異常ではありません。

- モーター音(ウォーン音、ウィーン音、ジー音)
- エアの排気音(シュー音、スー音、プッ音)
- エアの加圧動作音(ブー音)
- エアの動作音(パキ音)

※音が大きくなってきた場合は故障の可能性もあります。その際はドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

症状	確認していただくこと
本体が動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグがコンセントにきちんと差されているか確認してください。</li><li>● 本体の主電源が切れている可能性があります。本体の主電源スイッチを入(   側)に切り替え、主電源を入れてください。</li><li>● 主電源スイッチを入れたあと、各コースのボタンを押していない可能性があります。お好みのコースのボタンを押してください。</li><li>● 長時間連続で使用すると、モーター温度が上昇し、安全装置が働きます。主電源を切り、1時間ほどおいてから、再度お試しください。</li></ul>
突然停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>● タイマーにより約20分で自動で停止します。</li><li>● 長時間連続で使用すると、モーター温度が上昇し、安全装置が働きます。主電源を切り、1時間ほどおいてから、再度お試しください。</li></ul>
マッサージ停止後、再度コースを選択しても、マッサージが開始しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 終了処理中のため、操作を受け付けない場合があります。全ての動作が終了するまで待つて、再度お好みのコースを選んでください。</li></ul>

※上記の方法でも直らない場合や、同じような症状が度々生じる場合はそのままご使用にならず、本体の主電源をお切りになり、電源プラグをコンセントから抜いて、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

## ■ 製品仕様

### 本体

販 売 名	3D フットマッサージャー S
型 番	MF-003
類 別	機械器具77バイブレーター
一 般 名 称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード:34662000)
医 療 機 器 の 種 類	管理医療機器
医 療 機 器 認 証 番 号	229AHBZX00006000
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用を目的として一般家庭で使用する
電 源	AC100V～50-60Hz
定 格 消 費 電 力	45W
エ ア 圧 力	50kPa (±10%)
タ イ マ ー	20分 (±10%)
使用環境温湿度	+10～+40℃ 30～85%RH
保管環境温湿度	-20～+60℃ 10～95%RH
寸 法	W425×H490×D415mm
質 量	13kg (本体のみ)
付 属 品	取扱説明書、保証書
原 材 料	ABS、ポリウレタン、ポリエステル
製 造 販 売 元	株式会社ドリームファクトリー 商品管理センター 大阪府大阪市浪速区日本橋5-13-3 川北ビル2F 許可番号:27B2X00274
製 造 元	NINGBO BEYOND ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. ニンボー ビヨンド エレクトロニック テクノロジー カンパニー リミテッド 318, Huisheng Road, Economic Development Zone, Fenghua 認定番号:BG10501025
製 造 国	中国

※製品の仕様及びそのデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。

## ■保証とアフターサービス

使い方、お手入れ、修理などのご相談は、まずお買い求め先にご連絡ください。

### ●保証書

お買い上げの際に保証書をお買い求め先からお受け取りになり、「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認いただき、内容をよくお読みになったうえで大切に保管してください。

### ●修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら(P12)」をご確認ののち、直らない場合や、同じような症状が度々生じる場合は、電源プラグを抜き、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

◎お買い上げ日

◎販売名

◎故障の状況(できるだけ具体的に)

### ●保証期間内に修理を依頼される場合は、保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有償となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間：保証書に記載

### ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により、有償にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

技 術 料：診断、修理、調整、点検などの費用

部 品 代：修理に使用した部品および補助材料代

出張 費：修理品のある場所へ技術者を派遣する費用


修理品の運賃：修理品の往復の送料

※製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期限は製造終了から5年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

### ●その他ご不明な場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点は、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

### ●愛情点検のお願い

長年ご使用の3DフットマッサージャーSの点検をお願いします	
 愛情点検	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">             こんな症状はありませんか？           </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●煙が出たり、異常なおいや音がする</li> <li>●電源コードが異常に熱い</li> <li>●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする</li> <li>●内部に異物や水が入った</li> <li>●本体やカバーに変形や破損がある</li> <li>●その他異常がある</li> </ul> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">➡</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             ご使用中止           </div> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様相談窓口にて点検、修理をご相談ください。</p>

---

MEMO

---

# D DOCTORAIR

| ドクターエア |

<https://www.dr-air.com/>

ドクターエアお客様相談窓口

**0120-05-8000**

受付時間 10:00 ~ 18:00 / 年中無休 (年末年始除く)

製造販売元

株式会社ドリームファクトリー

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 5-13-3 川北ビル 2F

(本社所在地)

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-12-17 梅田スクエアビル 16F

<https://www.dreamf.co.jp/>