


REFRESH ROLL

リフレッシュロール(バーバパパ) RR-02BA PK

| 取扱説明書 |

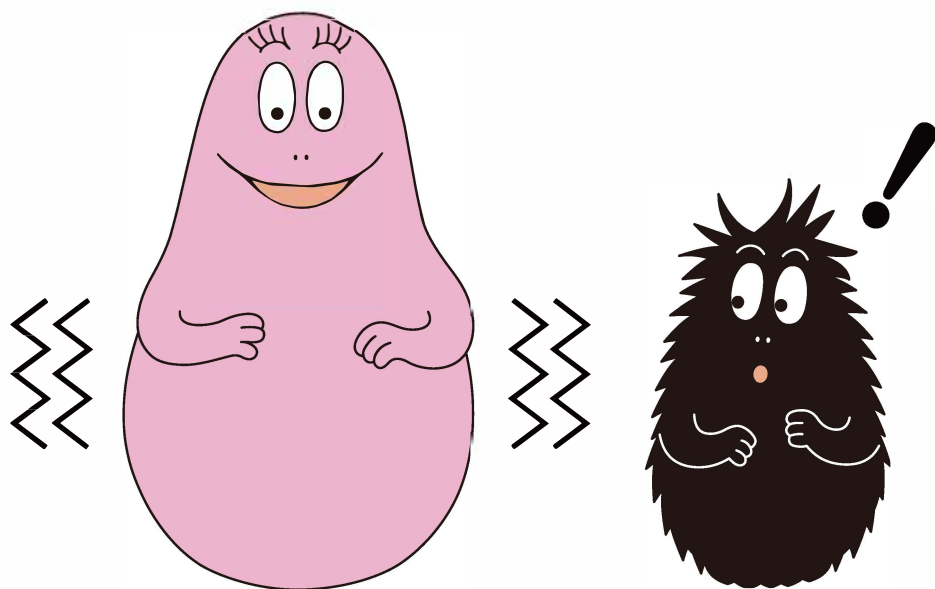

BARBAPAPA × **D) DOCTORAIR**

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

■ 目次

安全上のご注意	3
---------	---

・ 警告	3～4
------	-----

・ 注意	5
------	---

ご使用前の注意	6
---------	---

使用場所について	6
----------	---

各部の名称	7
-------	---

充電方法	8
------	---

ご使用方法	8
-------	---

安全装置について	9
----------	---

お手入れと保管について	9
-------------	---

・ お手入れ方法	9
----------	---

・ 保管方法	9
--------	---

故障かなと思ったら	10
-----------	----

廃棄について	10
--------	----

製品仕様	11
------	----

保証とアフターサービス	12
-------------	----

無料保証規定	13
--------	----

■安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について

誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

 分解禁止	⓪は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するマークです。 ⓪の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示しています。左の図記号は「分解禁止」を意味します。
 電源プラグを抜け	●は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するマークです。 ●の中や近傍に具体的な指示内容を絵や文章で示しています。左の図記号は「電源プラグを抜け」を意味します。

警告

 禁止	●医師から運動を制限されている方は使用しないでください。症状を悪化させる原因になります。 ●本製品はおもちゃではありません。12歳以下のお子様には使用させないでください。 ●本製品の耐荷重量は100kgです。体重が100kgを超える方はご使用にならないでください。 ●自ら意思表示ができない方や、操作が行えない方には使用させないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。 ●次の部位には使用しないでください。 ・整形手術をした部位・皮膚の下に金属・プラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位・皮膚トラブルのある部位 / 例：アトピー性皮膚炎・皮膚の炎症・物理的刺激などによる病的なシミやアザ・敏感肌・ケロイド体質など・痛覚・知覚障害を起こしている部位・胸部・陰部・頭部・骨折部位・背骨部位・関節部位 ●体に過度の負担をかける使用はおやめください。事故や体調不良の原因になります。	 禁止	●次の方は必ず医師とご相談の上、使用してください。 ・ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している方・悪性腫瘍のある方・心臓に障害のある方・脚部に重度の血行障害がある方・めまい・ふらつきなど平衡感覚に異常のある方、また平衡感覚に影響がでる薬を服用している方・妊娠中や妊娠の可能性がある方、出産直後の方・糖尿病など、高度の末しょう循環器障害による知覚障害のある方・高血圧の方・紫斑になりやすい方・安静を必要とする方や体力の衰えた方・体温38℃以上(有熱期)の方/例：急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき・骨粗しょう症・脊椎の骨折・ねんざ・肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の方・腱鞘炎・むち打ち症・頸椎損傷・脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニア・腰痛・坐骨神経症などの整形外科的疾患の方・背骨に異常のある方・医師の治療を受けている方や・上記以外に特に体の異常を感じている方
---	---	---	---

警告



必ず守る

- 初めてお使いになる方や、長時間で
使用にならなかった方、ご高齢の方
などは最初から長時間で使用する
ならず、徐々に体を慣らすようにして
ください。急激に運動量を増やすとケ
ガや体調不良の原因になります。
- 寒い場所から暖かい場所に移動し
たり、室温が急激に上がった直後
は、内部が結露する場合があります。
結露したまま使用すると、故障
の原因になりますので、大きな温度
変化があった場合は、1時間ほど置
いてから電源を入れてください。
- ご使用中にめまいや吐き気・痛み・
肌のかぶれなど、身体に異常があら
われたり感じたりした場合は、直ち
に使用を中止してください。不快感
が続く場合は、医師に相談してくだ
さい。事故や体調不良を起こす原因
になります。
- ご使用前に必ず、製品に破損や異常
がないか確認してください。破損や
異常が発見された場合は使用せず、
ドクターエアお客様相談窓口にご相
談ください。



禁止

- ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり引っ張ったり、無理に
曲げたり、捻じ曲げたり、束ねて使用
しないでください。また、コードに重
いものをのせたりはさみ込んだりし
ないでください。火災や感電の原因
になります。
- ACアダプターのコードを、ACアダプ
ター本体などに巻き付けしないでくだ
さい。断線による火災や感電の原因
になります。
- 付属のACアダプター以外は使用し
ないでください。また、付属のACア
ダプターは本製品専用です。他の機
器には絶対に使用しないでくださ
い。感電や故障の原因になります。
- 本体の充電用ジャックの隙間に、ピン
のような鋭いものや異物を差し込
まないでください。火災や感電、故
障の原因になります。
- 首の周辺には使用しないでくださ
い。事故やケガの原因になります。



風呂、シャワー
室での使用禁止

- 本製品は防水ではありませんので、
風呂場などで使ってはけません。
漏電によって、感電や発火の原因に
なります。



ぬれ手禁止

- 本製品は防水ではありませんので、
濡れた手で本体および、ACアダプ
ターには触れないでください。感電や
故障の原因になります。



分解禁止

- 本製品の分解は絶対にしないでく
ださい。感電やケガの原因になりま
す。
- お客様ご自身での内蔵充電電池の交
換は危険を伴いますので、絶対に行
わないでください。



禁止

- 次のような場所での使用および、保
管はおやめください。事故やケガ、
故障の原因になります。
・乳幼児、小さなお子様の手の届く
場所やペットが触れる場所・こたつ
の中や暖房器具の近く、ホットカー
ペットなどの上・直射日光が当たる
場所や車内など、高温になる場所・
水のかかる場所・高温高湿の場所・
ほこりの多い場所・振動や衝撃の加
わりやすい場所・強電磁界下
- アクセサリなどの硬いものやベル
ト、マフラーなどを着けたまま使用
しないでください。事故やケガの原
因になります。
- 電気定格を超える使い方や、交流
100V以外での使用はしないでくだ
さい。火災の原因になります。
- 本製品は充電電池を内蔵しておりま
す。次のようなことは絶対にしない
でください。
・加熱や火中投下・こたつや布団の
中に入れてのご使用および充電・毛
布などを被せてのご使用および充
電・直射日光があたる場所や、炎天
下の車内など高温になる場所での
ご使用および充電



電源プラグを抜く

- ACアダプターのコードやプラグが傷
んでいたり、コンセントへの差し込
みがゆるいときは、直ちに使用を中
止し、コンセントからACアダプター
を抜いて、ドクターエアお客様相談
窓口にご相談ください。そのまま
使用を続けると火災や感電の原因
になります。
- 本製品から異常音や異臭、煙が発
生したら、直ちに使用を中止し、
ACアダプターを抜いて、ドクターエ
アお客様相談窓口にご相談くださ
い。そのまま使用を続けると火災
や感電等の事故の原因になります。

注意



禁止

- エクササイズ以外の目的で使用しないでください。ケガや体調不良の原因になります。
- 他の器具、機器などと同時に使わないでください。事故やケガ、体調不良の原因になります。
- ご使用時以外は本製品に腰掛けたり、上にのったり、立ったりしないでください。事故やケガの原因になります。
- 本製品を落したり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 同時に複数人での使用はおやめください。必ずお一人でご使用ください。
- 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。事故やケガの原因になります。
- 医療行為には使用できません。
- ご使用中に眠らないでください。事故やケガの原因になります。
- ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。絶縁不良になり、火災・感電・ショートによる発火の原因になります。
- 使用中はほかの作業を行わないでください。事故やケガの原因になります。



必ず守る

- 足に使用する場合は、素足で使用してください。靴下やスリッパなどを履いて使用すると、事故やケガ、転倒の原因になります。
- 使用中、足や手が汗ばんできた場合は、使用を一時中断し、乾いたタオルなどで拭きとってから、再度ご使用ください。濡れたまま使用すると、事故やケガ、転倒の原因になります。
- 食後は十分に時間を置いてからご使用ください。体調不良の原因になります。
- ご使用にならないときは電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。湿気、ほこりなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。また、長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりなどが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
- タップで充電される際は、必ずタップの定格容量をお守りください。火災や故障の原因になります。
- 定期的に本体とACアダプターのお手入れを行ってください。とくにACアダプターはプラグにほこりが付着すると、トラッキング現象による火災の原因になります。
- 本製品を移動する際は、電源を切った状態で行ってください。またACアダプターを引きずって移動しないでください。



必ず守る

- 振動機能を使っでの連続使用は、1回15分までにしてください。長時間使用しないでください。事故やケガの原因になります。
- 使用中に体勢を変える際は、十分にご注意ください。事故やケガの原因になります。
- 水平で安定した場所で使用してください。タイルの上など、不安定な場所での使用はおやめください。
- 手足が十分に伸ばせるスペースを確保してから使用してください。
- ご使用の際は、動きやすく滑りにくい服装でご使用ください。ポケットの中は空にしてください。



電源プラグを抜け

- お手入れをする際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。感電や事故の原因になります。
- 停電したときは、直ちにACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 充電が完了したら、ACアダプターをコンセントから抜いてください。湿気、ホコリなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。
- 雷が鳴り始めたら、ACアダプターをコンセントから抜いてください。落雷による火災や、感電の原因となります。

■ ご使用前の注意


- ご使用前に必ず、本体に破損などの異常がないか確認してください。どんな小さな異常でも見つけた場合は使用しないでください。
- ご使用前に、ファンクションボタンやタイマー機能が、正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も、必ず確認してください。
- 異常が発見されたときは、直ちに電源を切り、ACアダプターなどはコンセントから抜いた後、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

■ 使用場所について


- ご使用の際は、手足が十分に伸ばせるスペースを確保してから使用してください。
- 水平で安定した場所で使用してください。
- フローリングなど硬い床の上で行う場合は、肌や骨に負担がかかり、身体を痛める場合がありますので、ヨガマットなどの滑りにくくクッション性のあるマットを敷いて使用してください。

■ 各部の名称

【本体】

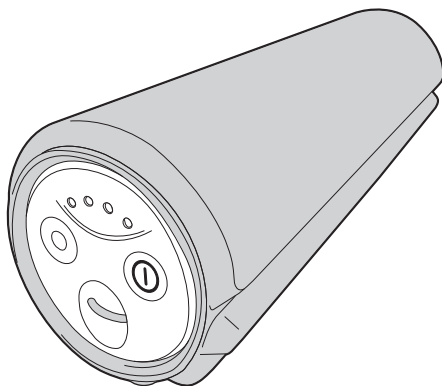


【操作部】

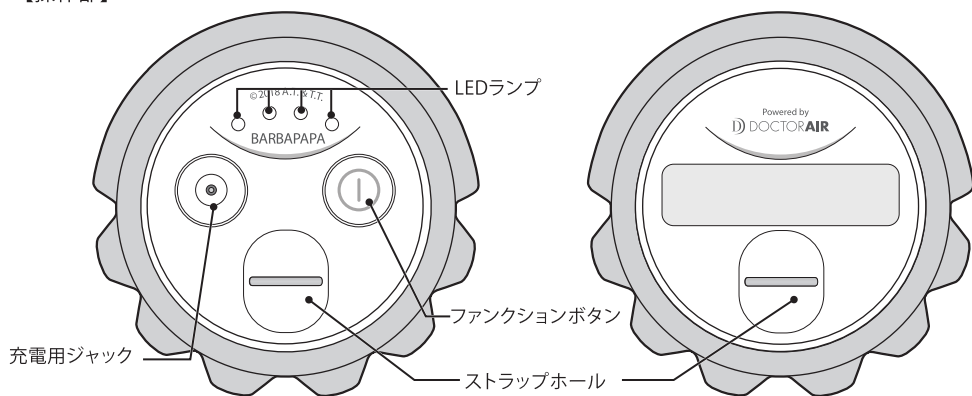

【付属品】

【ACアダプター】

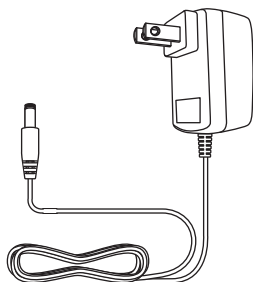

【オリジナルアシストストラップ】



■ 充電方法


- ① 本体の充電用ジャックに、ACアダプターを接続します。奥までしっかりと差し込んでください。
- ② ACアダプターを、家庭用コンセントに根元までしっかりと差し込みます。充電が開始され、LEDランプが点滅します。
- ③ 充電が完了すると、LEDランプが4灯すべて点灯します。ACアダプターを、コンセントと本体両方から外してください。

※初めての充電や、長期間で使用にならなかった後の充電の場合、電池持続時間が

短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

※空の状態から満充電まで約2.5時間かかります。

※充電中は振動機能はご使用になれません。

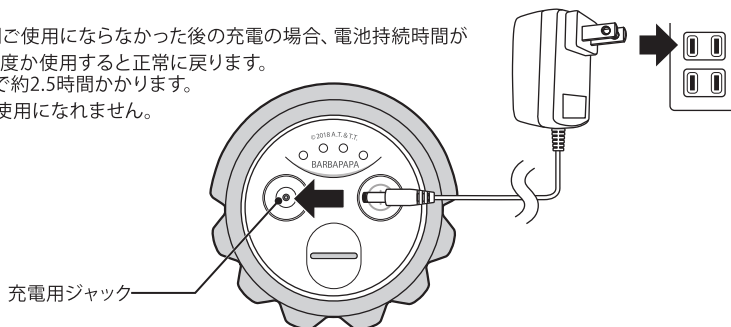

■ ご使用方法

- ① ファンクションボタンを押すと電源が入り、スタンバイモードになります。
この時、LEDランプが点灯し、充電の残量もご確認いただけます。3秒後にスタンバイモードは解除されます。
 - ② 2回目にファンクションボタンを押すと本体が振動します。ファンクションボタンを押すたびに、次のように振動の強さが変わります。お好みの強さを選んでください。
- ※スタンバイモード中にもう一度のファンクションボタンを押すことで振動機能が開始します。



※モード：弱・中・強の振動を繰り返す

※振動機能使用時のランプの点灯数は、現在選択している振動レベルを表します。

弱：●○○○ ➡ 中：●●○○ ➡ 強：●●●○ ➡ モード：●●●●

※振動させなくてもエクササイズにご使用になれます。慣れるまでは振動なし、もしくは弱いレベルでの使用をおすすめいたします。

※足などにご使用になる際は、座った状態でご使用ください。

※ゆっくりと無理をせずエクササイズを行ってください。振動機能を使つての連続使用は、1回15分までにしてください。長時間使用すると、逆効果やケガの原因になります。

- ③ 約15分後に自動で電源が切れます。途中で電源を切る場合は、電源が切れるまでファンクションボタンを押していただくか、ファンクションボタンを長押し(約3秒)してください。


※ファンクションボタンで振動レベルを切り替えても、タイマーはリセットされません。

- ④ 背中や腰などにご使用の際は、オリジナルアシストストラップをご利用いただくと便利です。

右図のようにストラップホールに取り付け、ご使用ください。

※オリジナルアシストストラップをつけて本体を振り回したり、強く引っ張らないようにご使用ください。事故やケガの原因になります。

※背中や腰以外でのオリジナルアシストストラップの使用はしないでください。

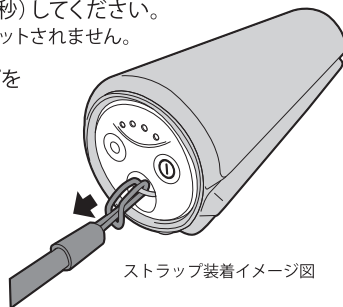

ストラップ装着イメージ図

■安全装置について

本製品は安全のため、内部に安全装置を有しております。安全装置は主に次の場合に作動し、電源が自動で切れます。

- 連続使用などにより、モーターやACアダプターの内部温度が規定より高くなった場合
- 安全上で何らかの異常を感知した場合

安全装置は、モーターやACアダプターの内部温度が正常な状態になると、再度使用が可能となります。ご使用中に動作が停止し、ファンクションボタンを押しても作動しない場合は、1時間程度経過した後に、再度電源を入れてください。

■お手入れと保管について

お手入れ方法

本体

- 必ずACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。
- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水で濡らしてかたくしぼったスポンジや、やわらかい布でふき取ってください。その後、乾いた布で乾ぶきしてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法

- ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、浴室などの水場や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所は避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。

■故障かなと思ったら

症 状	確認していただくこと
ファンクションボタンを押しても振動しない	●充電が切れている場合があります。再度充電を行ってください。 ●ACアダプターが接続されていないか確認してください。充電中は振動機能は使用できません。 ●1回目押下時はスタンバイモードです。2回目より振動が始まります。約3秒を過ぎるとスタンバイモードは解除されます。
振動が弱い	●充電が少なくなっている場合があります。再度充電を行ってください。
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	●周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～35℃で充電を行ってください。 ●初めての充電や長期間未使用後の充電の場合、電池持続時間が短い場合があります。何度が使用すると正常に戻ります。
突然停止した	●タイマーにより約15分で自動で停止します。
異音がする	●本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。

上記の方法でも直らない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

■廃棄について

本体

本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。



Li-ion

ACアダプター

ACアダプターは、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従い、廃棄してください。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

オリジナルアシストストラップ

オリジナルアシストストラップはお住まいの地方自治体の廃棄区分に従い、廃棄してください。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

■製品仕様

本体

販 売 名	リフレッシュロール(バー/バ/パ)
型 番	RR-02BA PK
電 源	充電式(リチウムイオン充電電池 DC7.4V 2200mAh)
定 格 消 費 電 力	10W
充 電 時 間 *	約2.5時間(満充電まで)
電 池 持 続 時 間 *	約180分(振動:弱で使用した場合) 約90分(振動:強で使用した場合)
充 電 回 数 *	約300回
振 動 回 数	弱:1500回/分 中:2000回/分 強:2500回/分 モード:1500-2500回/分(弱・中・強の振動を繰り返す)
タ イ マ ー	15分(±10%)
使 用 環 境 温 湿 度	+10～+35℃ 30～85%RH
耐 荷 重	100kg
寸 法	本体:約φ80×H250mm、オリジナルアシストストラップ:約330mm
質 量	約847g(本体のみ)
付 属 品	ACアダプター、取扱説明書、オリジナルアシストストラップ
原 材 料	EVA、ABS、PP
製 造 国	中国

※実際の時間および回数は使用状況、使用環境により異なります。

ACアダプター

モ デ ル 名	XM0900-1000LJ	MP12-090100-AJ
定 格 入 力	AC100 50-60Hz 0.5A	AC100 50-60Hz 0.4A
定 格 出 力	DC9.0V 1.0A	DC9.0V 1.0A

●内蔵バッテリーについて

内蔵バッテリーは、充放電可能回数(電池寿命)がございます。十分に充電を行っても充電できない、または電池持続時間が短い場合は、まず『故障かなと思ったら(P10)』の対処方法を行ってください。行っても改善されないときは、電池の寿命になります。その際は有料にて交換を承ります。お客様ご自身では行わず、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

■保証とアフターサービス

使い方、お手入れ、修理などのご相談は、まずお買い求め先にご連絡ください。

●保証書

お買い上げの際に保証書をお買い求め先からお受け取りになり、「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認していただき、内容をよくお読みになったうえで大切に保管してください。

●修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら (P10)」をご確認ののち、直らない場合や、同じような症状が度々生じる場合は、ACアダプターを抜き、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

◎お買い上げ日

◎販売名

◎故障の状況(できるだけ具体的に)

●保証期間内に修理を依頼される場合は、保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間：保証書に記載

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

技 術 料：診断、修理、調整、点検などの費用

部 品 代：修理に使用した部品および補助材料代

修理品の運賃：修理品の往復の送料

※製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期限は製造終了から5年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

●その他ご不明な場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点は、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

●愛情点検のお願い

長年ご使用の「リフレッシュロール (バーバパパ)」の点検をお願いします



愛情点検

こんな症状はありませんか？

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- ACアダプターが異常に熱い
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 内部に異物や水が入った
- 本体やカバーに変形や破損がある
- その他異常がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様相談窓口にて点検、修理をご相談ください。

無料保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。

※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。

※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けにできない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

- (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
- (2) 不当な修理や改造による故障および損傷
- (3) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
- (4) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
- (5) 保証書のご提示がない場合
- (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- (7) 車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
- (8) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
- (9) 弊社（および弊社関連会社）以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
- (10) 消耗品、本体以外の付属品の消耗

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料、出張費はお客様にてご負担願います。

修理メモ

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期限は製造終了から5年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

故障・修理のお問い合わせ
ドクターエアお客様相談窓口

 **0120-05-8000**

10時～18時 年中無休(年末年始除く)

株式会社ドリームファクトリー

〒530-0001 大阪市北区梅田1-12-17

梅田スクエアビル16F



© 2018 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED