


第1版

DOCTORAIR

取扱説明書

DOCTORAIR

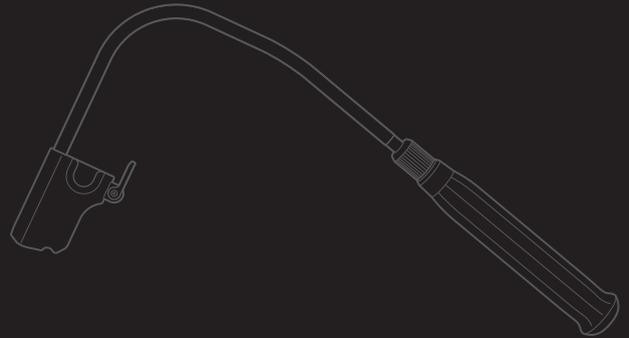

エクサガンバックアーム REG-12BABK

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

安全のために	3
各部の名称	5
本製品を使用する	6
お手入れと保管について	10
主な仕様	11
保証規定	15

安全のために

- 本製品は、別売品エクサガン LUXE (REG-12)、エクサガン ハイパー (REG-04) 専用のアームです。その他の製品には使用しないでください。
- 使用する前に、本書およびエクサガン LUXE、エクサガン ハイパーの取扱説明書を必ず読んでください。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。


警告・注意について	
誤った取扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。	
 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例	
お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
 禁止	してはいけないこと。
 必ず守る	必ず行うこと。

警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●自ら意思表示ができない方や、操作が行えない方には使用させない。(ケガや思わぬ事故の原因) ●乳幼児や小さなお子様に本製品を使用させたり、遊ばせたりしない。(思わぬ事故の原因) ●使用前に必ず、本製品に破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品は手に持って使用することを意図して作られています。必ず手に持って使用してください。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●分解・改造は絶対にしない。(発火、事故、故障の原因)

各部の名称

本体

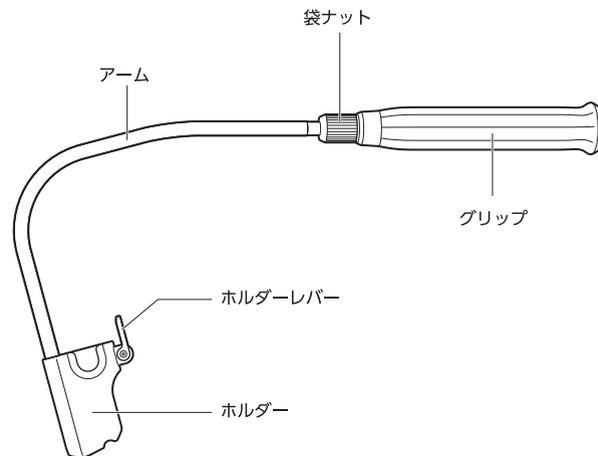

付属品



取扱説明書

本製品を使用する


- 本製品は、別売品エクサガン LUXE(REG-12)、エクサガン ハイパー(REG-04)専用のアームです。その他の製品には使用しないでください。
- 使用する前に、本書およびエクサガン LUXE、エクサガン ハイパーの取扱説明書を必ず読んでください。

ご使用になる前に

本製品を組み立てる


- 1 アームの先端をグリップのくぼみに挿し込みます。
- 2 袋ナットで締めてしっかりと固定します。

※使用中に袋ナットがゆるんできたときは、再度締め込んでください。

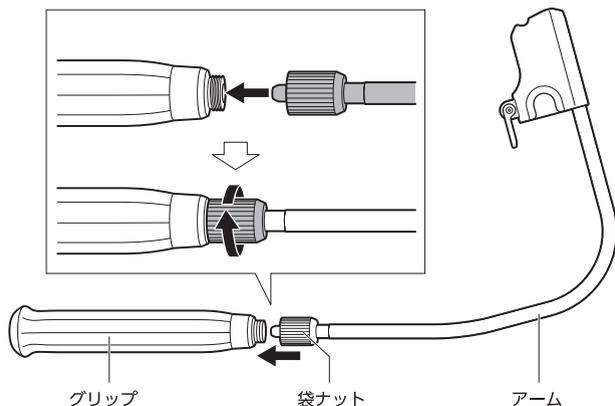


エクサガンを固定する

- 1 ホルダーレバーのロックを解除し、エクサガンをホルダーに挿し込みます。
- 2 再びホルダーレバーをロックします。
※留まるまで押し込みます。
※手指を狭まないように十分にご注意ください。

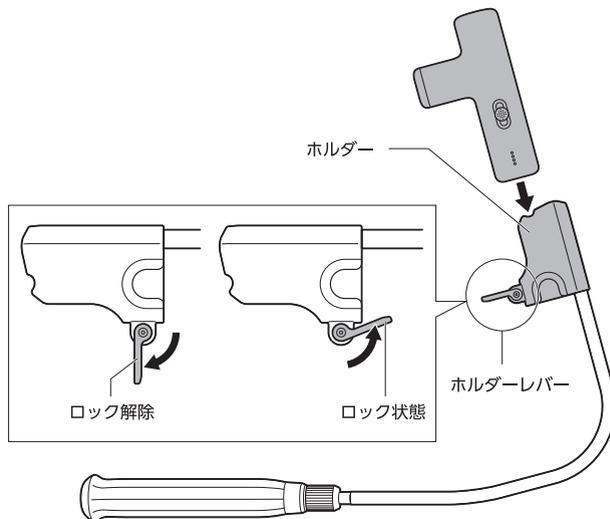

エクサガンを取り外す

- 1 ホルダーレバーのロックを解除します。
- 2 ホルダー部の側面をしっかりと持ち、エクサガンを矢印のほうに押し出しながら取り外します。
振動でエクサガンが外れないように、取り外しにくい仕様となっています。水平ではなく、やや斜め上の方向に動かすと、取り外しやすくなります。

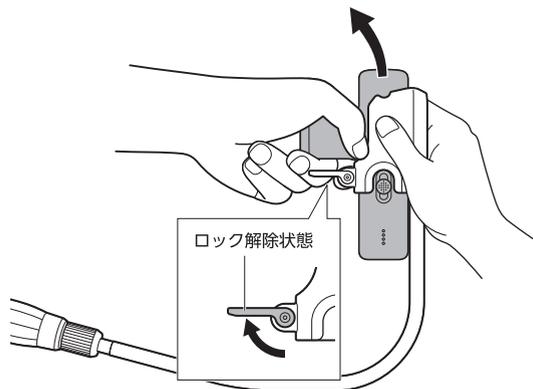


- 使い始めは、エクサガンを専用アームにセットした際に跡が残る場合があります。その際は、柔らかい布で拭き取ってください。

基本的な使いかた

図のように、背中や腰など手を回しにくい部分にエクサガンを当ててください。

※力を入れすぎると、アームが破損したり、エクサガンが故障する恐れがありますのでご注意ください。

※ご使用時は周囲にぶつからないように十分ご注意ください。お子様の手の届くところで使用、保管しないでください。

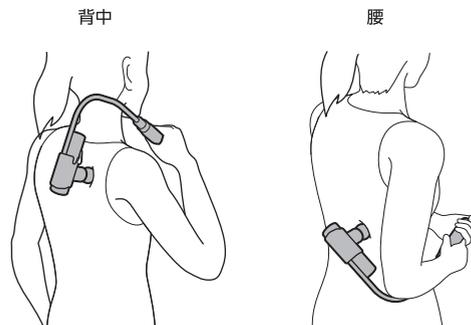

お手入れと保管について

お手入れについて

- ご使用后、やわらかい布で拭いてください。
- 汚れが付いた際は、水または希釈した中性洗剤で濡らしてからからたく絞ったスポンジややわらかい布で拭き取った後、乾いた布で乾拭きしてください。また、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。
- お手入れをする際は、必ずエクサガンを取り外してから行ってください。

保管について

- 汚れやほこりをよく拭き取り、水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所で保管しないでください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、お持ちの袋などに入れて保管してください。

廃棄する場合は

廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳細な内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

主な仕様

製品名	エクサガンバックアーム
型番	REG-12BABK
外形寸法	W 258.5 × H 428 × D 41.5mm
質量	260g
材質	ホルダー部：ポリカーボネート+ABS樹脂、 アルミニウム合金、炭素鋼 アーム部：アルミニウム合金 グリップ：アルミニウム合金、シリコン
付属品	取扱説明書
生産国	中国

MEMO

MEMO

保証規定

製品本体に破損があるなど、明らかな初期不良が認められる場合、且つ未使用品に限り、新品の商品と交換させていただきます。(返品・交換送料は当社負担)

初期不良は、ご購入後(商品到着日)より1ヶ月とさせていただきます。

また、交換の際は、お買い上げ店名、お買い上げ日が記載された証明書(レシート、領収書など)が必要となります。

本製品の修理は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

ドクターエアお客様相談窓口
10時～18時 年中無休(年末年始除く)

 0120-05-8000

株式会社ドリームファクトリー
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル

お客さまサポート

