

保証書

製品名	ドクターエア リフトライザー		
型番	BBI-01		
お買上げ日		年	月 日
保証期間	お買上げ日より本体1年間（消耗品および付属品は除く）		

| お客様情報 |

フリガナ	
お名前	
〒	
ご住所	
お電話番号	
メールアドレス	
販売店名	
住所	
電話番号	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
お買上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理を依頼してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買上げ日とさせていただきます。
販売店名欄に記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。
お客様にご記入いただきました保証書の投扱は、保証期間内のサービス活動および、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用しません。
（無料保証規定のページもご覧ください。）

故障・修理のお問い合わせ
| ドクターエアお客様相談窓口 |



0120-05-8000

10時～18時
年中無休（年末年始除く）




取り扱い店舗情報などは

ドクターエア

検索

近型店舗をはじめ、家電量販店などでご体験いただけます。
詳しくはホームページをご覧ください。

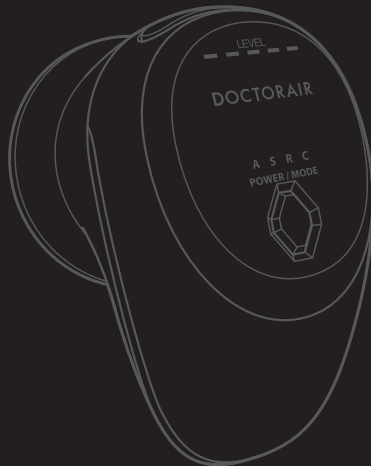

ドクターエア リフトライザー BBI-01

このたびはドクターエア製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

安全のために.....	3
各部の名称と機能.....	11
ディスプレイの機能.....	14
充電する.....	16
本製品を使用する.....	18
お手入れと保管について.....	26
故障かなと思ったら.....	27
主な仕様.....	29
保証とアフターサービス.....	30

安全のために

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について 誤った取扱いをしたときに生じる危険や 損害の程度を区分し、説明しています。	
 危険	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの。
 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例 お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
 禁止	してはいけないこと。
 必ず守る	必ず行うこと。

危険



禁止

- 下記のような医療機器と併用しない。(生命に著しい障害をもたらす原因)
 - ・ペースメーカーなどの体内挿込み型医療機器
 - ・人工心肺等の生命維持用医療機器
 - ・心電計などの装着型医療機器

警告



禁止

- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させない。(ケガや思わぬ事故の原因)
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。(症状を悪化させる原因)
例: 心臓疾患・急性疾患・有熱性疾患・血圧異常・血栓(塞栓)症・重度の動脈瘤・急性静脈瘤
- 各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)・頸椎症・飲酒や薬を服用中の方
- 顔面の神経障害のある方・化学繊維でかぶれた経験のある方・健康が得にすぐれない方・疲労が激しい方など
- 皮膚アレルギーの方・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方(肌トラブルの原因)
- 交通事故などにより頭部に後遺症がある方
- 妊娠中や妊娠の可能性がある方、出産直後の方
- 体調がすぐれない方
- ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制剤・眠気を誘う薬を服用した方

警告



禁止

- 次の部位には使用しない。
 - ・整形手術をした部位・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
 - ・皮膚トラブルのある部位/例: アトピー性皮膚炎、皮膚の炎症、過度な日焼け、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など、痛覚、知覚障害を起こしている部位
 - ・当日、脱毛処理をした部分
 - ・外科手術(形成・整形・美容など)を受けた部位
 - ・のど、粘膜
 - ・眼球・上まぶた・下まぶた(目のトラブルの原因)
 - ・膨らんだホクロ、ウイルス性のイボ
 - ・皮膚が薄い部位
- 過度に1か所に集中して使用しない。(やけど・肌を傷める原因)
- 同じ箇所にあて続けず、必ず肌の上を動かしながら使用する。(やけど・低温やけどの原因)
- 電極部全体が当たらない部分には使用しない。(やけど・低温やけどの原因)
- LED光を直接のぞき込まない。(目を傷める原因)
- アクセサリー類(ネックレス・イヤリング等)は外してから使用する。(事故・ケガの原因)
- 乳幼児や小さなお子様には本製品を使用させたり、遊ばせたりしない。(思わぬ事故の原因)
- 湿布剤(スプレー式など含む)との併用はしない。(体調不良の原因)
- 本体の充電用ジャック(TYPE-C)の隙間に、ピンのような鋭いものや異物を挿し込まない。(火災や感電、故障の原因)
- 使用後は必ず本体の汚れ・水分をしっかりと拭き取る。(濡れたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因)

警告



禁止



必ず守る

充電電池について

- 本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。
 - ・ 加熱や火中投下
 - ・ 高温環境での使用、充電、放置
 - ・ こたつや布団に入れてのご使用、充電
 - ・ 毛布などを被せてのご使用、充電
 - ・ 直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所での使用、充電
- 性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。
性能の落ちたリチウムイオン電池を無理に使用すると、重大な事故につながる恐れがあります。電池性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
*使用できる時間が短くなった・充電できなくなったなど
- 下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
 - ・ 電池の膨張・異音・異臭
 - ・ 充電しても動作しない
 - ・ 極端に使用時間が短くなった
 - ・ 充電中に熱くなる

警告



必ず守る

- 次の方は必ず医師と相談の上、使用する。(事故・体調不良・症状悪化の原因)
 - ・ ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している方
 - ・ 金属アレルギーの方
 - ・ 悪性腫瘍のある方
 - ・ 重度の血行障害がある方
 - ・ 糖尿病など高度の末しょう循環器障害による知覚障害のある方
 - ・ 高血圧の方、紫斑になりやすい方
 - ・ 安静を必要とする方や体力の衰えた方
 - ・ 体温38℃以上(有熱期)の方
 - ・ 例:急性炎症症状(倦怠期、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰退していること
 - ・ 医師の治療を受けている方
 - ・ 上記以外に特に身体の異常を感じている方
 - ・ エステ、クリニックなどでダウンタイム(回復に要する時間)が必要な施術、および肌に赤みが発生する施術を約2週間以内に受けた方
 - ・ 敏感肌の方
- 初めて使用する前は必ずパッチテストを行ってから使用する。(事故・ケガの原因)
- 寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露する場合がある。結露したまま使用すると、故障の原因になるため、大きな温度変化があった場合は、1時間ほど置いてから電源を入れる。
- 使用中にめまいや吐き気、痛み、肌のかぶれなど、身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は、医師に相談する。(事故・体調不良の原因)
- 歯の治療中の方、歯に詰め物がある方は、EMSのレベルを下げて使用部位を調節する。
- EMSにより頬・顎に刺激を強く感じたり、不安に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。
- 使用前に必ず製品に損傷、変形、汚れがないかを確認し、異常が発見された場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談する。(ケガ・事故の原因)

警告



必ず守る

- 付属の充電台は本製品専用のため、他の製品には使用しない。
- 本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。(感電やショートによる火災などの原因)
- しばらく使用しなかった場合は、必ず使用前に操作ボタンやディスプレイ表示、タイマーが正常に動作するか確認する。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止する。ACアダプタ使用時は、コンセントからACアダプタを抜く。(発煙、発火、感電の原因)
〈異常・故障例〉
本体、アダプタ、コードが
・ 変形したり、異常に熱い
・ 異常音や異臭・煙発生
すぐにドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。



禁止

- 電源について
- 充電台は防水仕様ではないため、浴室内での充電は絶対にしない。(感電・ショートによる火災の原因)
 - 濡れた手でACアダプタをコンセントから抜き差ししない。(感電や事故の原因)
 - 濡れた手で充電端子や充電用ジャックには触れない。(感電や事故の原因)
 - 電源プラグ・USBコードを破損するようなことはしない。(感電・ショートによる発火・火災の原因)
傷付ける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重い物をのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する
 - ACアダプタが傷んだり、コンセントへの挿し込みがゆるいときは使用しない。



分解禁止

- 分解・改造は絶対にしない。(発火、事故、故障の原因)
- 内蔵充電電池の交換は危険を伴うため、絶対にしない。

注意



禁止

- ピーリングとの併用はしない。(肌トラブルの原因)
- 用途以外の目的で使用しない。(ケガ・体調不良の原因)
- 他の器具、機器などと同時に使用しない。(事故やケガ、体調不良の原因)
- 本製品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えない。(火災や感電、故障の原因)
- 用途以外に負荷がかかるような使用はしない。
- ご使用中に眠らない。(事故・ケガの原因)
- 飲酒中や飲酒後は使用しない。(事故・ケガの原因)
- 使用中はほかの作業を行わない。(事故・ケガの原因)
- 電極部に金属を接触させない。(感電の原因)
- 医療行為には使用しない。



必ず守る

- EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げず、レベルは少しずつ調節する。
- 下記の使用限度を守って使用する。
 - ・ アクティブモード: 1回3分、1日1回まで
 - ・ スキンケアモード: 1回3分、1日1回、週2~3回まで
 - ・ リリースモード: 1回3分、1日1回、週2~3回まで
 - ・ コアバランスモード: 1回6分、1日1回、週1~2回まで
 ※ コアバランスモードは他のモードと同日に使用しないでください。
- 同一部位への連続使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。
過度なご使用は肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、肌の状態をみながらご使用ください。
- 使用後は必ず毎回「お手入れと保管について」(26ページ)を参照して、製品に付着した汚れなどを取り除く。(肌トラブル・故障の原因)
- 基礎化粧品やジェル、クリームなどを併用する場合は放置せず、よく絞った布などで綺麗に拭き取る。(変色・破損の原因)
- 食後は十分に時間を置いてから使用する。(体調不良の原因)

⚠ 注意



必ず守る

電源について

- コンセントや配線器具の定格を守る。(定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 電源プラグ・器具用プラグは根元まで確実に挿し込む。(感電や発熱などによる火災の原因)
- 本体や電源プラグなどにほこりが付着しないように定期的に手入れを行う。(湿気・ほこりなどで絶縁不良になり、火災の原因)
- 充電が完了したら、ACアダプタをコンセントから抜く。
- 雷が鳴り始めたら、直ちに充電を中止する。(故障の原因)

防水仕様について

- 本体は防水仕様 (IPX4) になっていますが、本製品に直接水をかけないで下さい。日常生活の手洗いでの水しぶき程度であれば問題ありません。
- 充電台は防水仕様ではありません。

各部の名称と機能

本体

EMS レベルボタン (+/-)



ディスプレイ


電源 / ファンクションボタン

コットンリング

電極部

充電端子

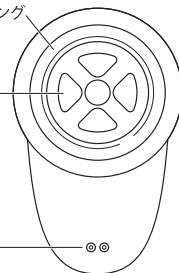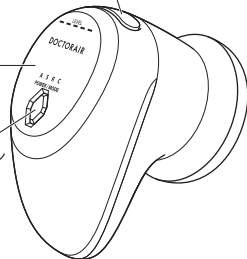

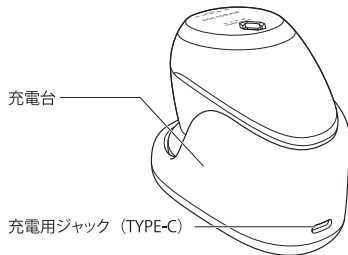

電源/ファンクションボタン

長押し(約1.5秒)で電源のオン/オフを切り替えます。

短押しで4モードを切り替えます。

アクティブモード→スキンケアモード→リリースモード→コアバランスモード→アクティブモード…の繰り返し

EMSレベルボタン

EMSのレベルを設定します。

+ボタンを押すたびにEMSレベルが1ずつアップします。(レベル1～5)
-ボタンを押すたびにEMSレベルが1ずつダウンします。(レベル1～5)

※モードを切り替えると、EMSレベルボタンは1に戻ります。

ディスプレイ

EMSのレベル、モード、電池残量/充電残量を表示します。

コットンリング(本体の電極部に取り付けて梱包)
コットンを電極部に固定できます。

電極部

肌に当てます。

充電端子

充電時に充電台の端子を合わせます。


充電台

充電時に本体を置きます。

充電用ジャック (TYPE-C)


充電時にUSBコード(TYPE-C (A-C))を接続します。

付属品

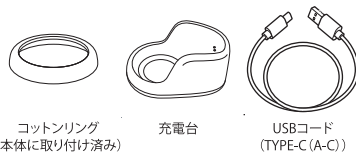

取扱説明書
(保証書付)

ディスプレイの機能

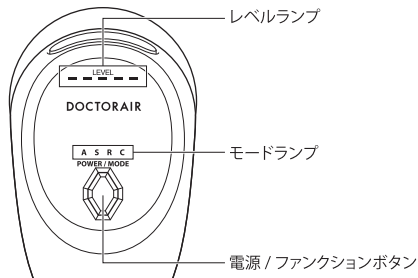

【電源オフ】電源／ファンクションボタンを押すと、3秒間電池残量を表示します。

モードランプ

選択したモードを以下のように表示します。

A	S	R	C
アクティブ	スキンケア	リリース	コアバランス

レベルランプ

【動作中】以下のようにEMSのレベルを表示します。

□消灯、■点灯



【充電中】以下のように充電残量を表示します。

□消灯、▣点滅、■点灯



※充電を中断すると、3秒間電池残量を表示した後に消灯します。

充電する


初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

ご注意

- ・ 充電中は動作しません。動作中に充電を行うと、自動的に電源が切れ、充電が開始されます。
- ・ 初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電する場合、電池持続時間が短い場合があります。
- ・ 以下の症状が確認された場合は、ご使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
 - － ご使用前に、本体や付属品に損傷がないかをご確認いただき、異常が発見されたとき
 - － 充電を行っても十分に充電できないとき
 - － 充電持続時間が短いとき

1 充電台に本体を置きます。


本体と充電台の端子が触れあうように置いてください。

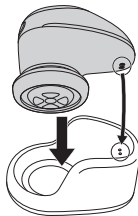

ご注意

必ず本体の水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。

2 充電台の充電用ジャック (TYPE-C) に付属のUSBコードをしっかりと挿し込みます。

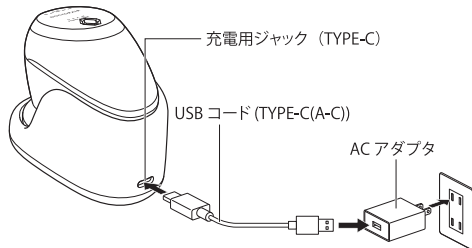

※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

3 USBコード (TYPE-C(A-C)) をお持ちのACアダプタに挿し込んで、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。

ご注意

- ・ 市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC5.0V 2.0A以上のACアダプタを必ず使用してください。
※USB PD PPS規格のACアダプタは非対応です。
- ・ ご使用になるACアダプタに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプタは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプタの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ 電気用品安全法に適合し、PSEマークが表示された充電器をご使用ください。不正規な充電器を使用すると、充電器や製品が高温になる恐れがあります。

4 充電が完了したら、USBコード (TYPE-C(A-C)) を充電台から取り外し、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜きます。

本製品を使用する

ご使用になる前に

- 本製品を初めてご使用になる前は、必ずパッチテスト(皮膚試験)を行ってください。詳しくは「肌へのパッチテスト(皮膚試験)」(19ページ)をご覧ください。
- 素肌(メイク落とし・洗顔をした状態)でお使いください。
- ご使用前、またはしばらくご使用にならなかった場合は、操作ボタンなどが正常に動作することを確認してください。
- 必ず肌の上を動かしながら使用してください。同じ個所にあて続けるとやけどの原因になります。
- RF(ラジオ波)は、使用時の化粧品の種類やお肌の状態により、温感が変わります。
- 推奨環境温度は10℃～40℃です。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。詳しくは「充電する」(16ページ)をご覧ください。
- 本体の表面に異物が付着していないか、割れや傷がないかを確認してください。
- 本製品は1回3分または6分※1のタイマーで電源が切れるように設定されていますが、同一部位に長時間使用しないでください。逆効果やケガの原因になります。
- 本体や電極部が熱くなることがあります。その際はしばらく冷ましてからご使用ください。
- 初めてご使用される際は、安全のため必ずレベル1からお試ください。

※1

- アクティブモード、スキンケアモード、リリースモードは1回3分間
- コアバランスモードは1回6分間

肌へのパッチテスト(皮膚試験)

初めてご使用になるときは、必ずテストを行ってください。

ご注意

- 肌トラブルを防止するため、本製品を使用する前に必ず実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

- 1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取ります。
- 2 肌にお手持ちの化粧水などを塗ります。
- 3 本体の電源を入れ、コアバランスモードのEMSレベル1で約6分間使用します。(「基本的な使いかた」(22ページ))
- 4 肌に異常がないことを確認します。
24時間以内に肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。

モードについて

	モード	こんなとき に	機能	コットン	おすすめ 化粧品 ^{※8}	時間	使用頻 度
デイリー ケア	アクティ ブモード	気になる表 情筋ケアに	・EMS ^{※1} ・タッピング ^{※2} ・RF ^{※3} ・マイクロカ レント ^{※4} ・LED ^{※5} (赤・ 緑)	どちら でも	美容液ま たは化粧 水または シートマ スク	約3分	毎日 ^{※9}
	スキンケ アモード	角質層まで の浸透ケア をしたいと き	・タッピング ・イオン導入 ^{※6} ・LED (赤)	コットン あり	化粧水ま たは美容 液	約3分	週 2 ～ 3 回
	リリース モード	透明感のある 肌にした いとき	・タッピング ・イオン導入 ^{※7} ・LED (青)	コットン あり	化粧水	約3分	週 2 ～ 3 回
スペシャ ルケア	コアバラン スモード	肌にハリ、 ツヤを与え たいとき	・EMS ・タッピング ・RF ・イオン導入 ・LED (赤)	どちら でも	美容液ま たは化粧 水または シートマ スク	約6分	週1～2 回 ^{※10}

※1 筋肉を収縮させる電気刺激のことです。

※2 肌を軽く叩くようにしてマッサージを行うことです。

※3 Radio Frequency (ラジオ波) と呼ばれる高周波のことです。肌に温感を伝えます。

※4 筋肉を刺激する微弱な電気刺激のことです。

※5 肌をフォトでケアする技術のことです。

※6 肌に微弱な電流を流すことにより、化粧水や美容成分を角質層のすみずみへ浸透させる技術のことです。

※7 肌に微弱な電流を流すことにより、洗顔やクレンジングでは落としきれない毛穴の汚れやメイク残りを、イオンの力で浮かせる技術のことです。


※8 お手持ちの化粧品をご使用いただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因になります。

※9 あくまでも目安ですので、肌の状態を見ながら週に2～3回など使用頻度を調節してください。

※10 コアバランスモードは他のモードと同日に使用しないでください。

コットンの付けかた

1 本体からコットンリングを外します。

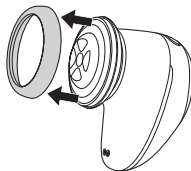

2 電極部にコットンを1枚のせ、コットンリングを本体に押し込むように取り付けます。

- ・コットンリングでコットンがとまりづら場合は、大きめで薄手のコットンを使用してください。
- ・厚手のコットンはとまりづらいため、半分に割いて使用してください。コットンが厚すぎるとRFの温感が弱くなる可能性があります。

3 コットンにお手持ちの化粧水などをしみこませます。電極部全体に化粧水がいきわたるようにしみこませてください。 ※コットンが乾いてきたら化粧水などを足してください。

基本的な使いかた

- 1 メイクを落として洗顔します。
油分や汚れを落として、肌を清潔な状態にします。
- 2 必要な場合は、電極部にコットンを装着し、化粧水などをしみこませます。(「コットンの付けかた」(21ページ))
- 3 電源/ファンクションボタンを1.5秒以上押し、電源をオンにします。
アクティブモードで動作が開始されます。
- 4 電源/ファンクションボタンを押して、お好みのモードを選びます。
アクティブモード→スキンケアモード→リリースモード→コアバランスモード→
アクティブモード…の繰り返し
- 5 EMSレベルボタン(+/-)を押して、お好みのレベルを選びます。
・+ボタンを押すたびにEMSレベルが1ずつアップします。(レベル1～5)
・-ボタンを押すたびにEMSレベルが1ずつダウンします。(レベル1～5)
※モードを切り替えると、EMSレベルは1に戻ります。
- 6 電極部を肌に密着させて動かします。
・1か所に止めないように、必ず動かしながら使用してください。
・強く押しあてないでください。

肌へのあてかた

ご注意

- ・電極部全体が肌に触れるように使用してください。
- ・必ず肌の上を動かしながら使用してください。同一部位にあて続けるとやけどや低温やけどの原因となります。
- ・眼球・上まぶた・下まぶたには使用しないでください。
- ・LED光を直接のぞき込まないでください。

図中の記号について


➤ : 矢印に沿ってぐるぐると動かしてください。

● : 使用不可の部位です。


⦿ : LEDのみ使用できます。

※LEDは、目を閉じ、目から5cm以上離してご使用ください。


アクティブモード

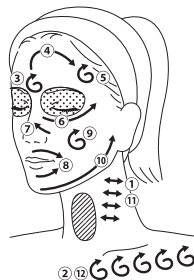


スキンケアモード

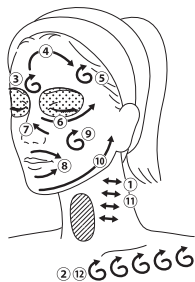

リリースモード

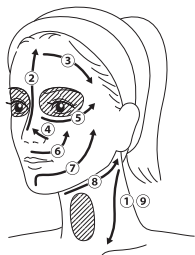

コアバランスモード

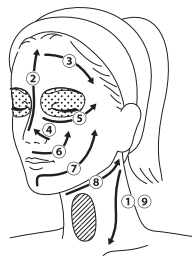

使った後は

日ごろお使いの化粧品などで肌を整えてください。

お手入れと保管について

お手入れについて

ご注意

- 使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。
- お手入れするときは、充電していないこと、電源がオフになっていることを確認してください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。

ご使用後、本体及びコットンリングなどにジェルや化粧品などが残らないよう、やわらかい布でしっかりと拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水で濡らして固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。その後、乾いた布で乾拭きしてください。

保管について

- 保管の際は、必ず電源を切ってください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所で保管しないでください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、お持ちの袋などに入れて保管してください。
- USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。

廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
電源を入れても動作しない	• 充電中はファンクションボタンを押しても動作しません。充電完了後にお使いください。 • 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
EMSの刺激を感じない、刺激が弱い	• 肌に密着させてください。 • EMSレベルを調節してください。 • 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。 • 肌が乾燥している可能性があります。水またはぬるま湯で湿らせてください。
RFの温かさを感じない	• お肌に水分が足りていない、または乾燥している可能性があります。 • お肌を化粧水などで湿らせてからご使用ください。 • 動かすスピードが速い可能性があります。少し遅く動かしてください。 • 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
タッピングが弱い	• 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。

症状	確認していただくこと
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	- 周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境下で充電を行ってください。 - 初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻る場合があります。 - ACアダプタで充電する場合は、定格出力DC5.0V 2.0A以上を必ず使用してください。 ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応です。 - 付属品以外のUSBコードを使用する場合は、定格出力DC5.0V 2.0A以上に対応したUSBコードをご使用ください。 - 本体と充電台の充電端子が正しく触れているかを確認してください。
突然停止した	- アクティブモード、スキンケアモード、リリースモードは約3分、コアバランスモードは約6分で自動停止します。 - 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
使用時に製品から音がする	本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

本体

製品名	ドクターエア リフトライザー
型番	BBI-01
電源	リチウムイオン電池(7.4V、560mAh)
定格消費電力	3.4W以下(動作時)、5.0W以下(充電時)
充電時間	約1時間30分
タイマー	- 約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード) - 約6分(コアバランスモード)
寸法	- 本体:W52×D84×H66mm(コットンリング付き) - 充電台:W63×D93×H50mm
質量	- 本体:192g(コットンリング付き) - 充電台:54g
付属品	充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)
材質	PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス
使用環境温湿度	+10℃～+40℃、85% R.H.以下
保管環境温湿度	-10℃～+60℃、85% R.H.以下
生産国	中国
対応ACアダプタ	定格出力: DC5.0V 2.0A以上使用すること

※1実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。

当社推奨の使用方法に基づきます。

※2ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。
また内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(27ページ)をご確認ください。
直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源コードを外し、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- ・お買い上げ日
- ・製品型名: BBI-01
- ・故障の状況(できるだけ具体的に)

保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間: 保証書に記載

保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- ・技術料: 診断・修理・調整・点検などの費用
- ・部品代: 修理に使用した部品および補助材料代
- ・修理品の運賃: 修理品の往復の送料

修理に関する
お問い合わせ



補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。
。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

定期点検のお願い

本製品の定期点検をお願いします	
こんな症状はありませんか?	ご使用中止
● 煙が出たり、異常なおいや音が出る ● USBコードを動かすと、通電したりしなかったりする ● 内部に異物や水が入った ● 本体に変形や破損がある ● その他異常がある	故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様相談窓口にて点検、修理をご相談ください。

無料保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料（往復共）などはお客様のご負担となります。
※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けにできない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - 不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - 弊社（および弊社関連会社）以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - 消耗品、本体以外の付属品の消耗
 - 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

修理メモ

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。