

DOCTORAIR

084

取扱説明書

ドクターエア EMSスカルプスパ BSC-01

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。



目次

はじめに	安全のために	3
	各部の名称と付属品	18
使いかた	ご使用前の準備	23
	ドクターエア EMSスカルプSPAを使用する	28
その他	お手入れと保管について	32
	故障かなと思ったら	35
	主な仕様	38
	保証とアフターサービス	40

安全のために

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について

誤った取扱いをしたときに生じる危険や
損害の程度を区分し、説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの。

図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



禁止

してはいけないこと。



必ず守る

必ず行うこと。

危険



禁止

- 下記のような医療機器と併用しない。(生命に著しい障害をもたらす原因)
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型医療機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医療機器
 - ・心電計などの装着型医療機器

警告



禁止

- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させない。(事故やケガ、体調不良の原因)
- 小さな子供に使用させたり、遊ばせない。乳幼児の手の届く範囲では使用せず、また置いたり、保管したりしない。(ケガや思わぬ事故の原因)
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

警告



禁止

●次の方は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方や治療を受けている方は医師と相談の上、使用する。

・骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術を受けた方・目や顔に疾患がある方・洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方・アレルギー体質で特に肌が敏感な方・悪性腫瘍のある方・感染症疾患の方・心臓に障害のある方・妊娠中や妊娠の可能性のある方、出産直後の方・糖尿病など、高度の末しょう循環機器障害による知覚障害のある方・施術部に創傷のある方・安静を必要とする方や、体力の衰えた方・体温38℃以上（有熱期）の方/例：急性炎症症状（倦怠感・悪寒・血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき・骨粗しょう症・脊椎の骨折・ねんざ・肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の方・貧血ぎみの方・血圧に異常のある方・血行障害のある方・温度感覚喪失が認められる方・低温やけどをしたことがある方・出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方・高血圧の方・心臓疾患のある方、血栓のある方・体調のすぐれない方・飲酒後や疲労の激しい場合・薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方・眠気をさそう薬を服用中の方・腱鞘炎・

警告



禁止

むち打ち症・頸椎損傷・脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニアなどの整形外科的疾患の方・医師の治療を受けている方や、上記以外にとくに身体の異常を感じている方

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。(事故や肌・身体トラブルの原因)

・整形手術をした部位・美容医療施術直後(施術後2週間程度)・皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合およびその部位・にきび、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある場合およびその部位・かゆみやほてりのある部位・膨らんだほくろ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・鼻・耳・唇・眼球・まぶた・目のまわり・口内や陰部・粘膜など・心臓・みぞおちの周辺部位・生理中の腹部・刺青(タトゥー)周辺・当日、脱毛処理をした部位・金属、シリコン等を埋め込んである部位

- シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方は使用しない。(肌トラブルの原因)

警告



禁止

- 使用中は金属や他の電気製品に接触させない。(ケガ・本体が故障する原因)
- 動作中にアタッチメントの間に指を入れない。(ケガの原因)
- ほかの製品と同時に使用しない。(体調不良の原因)
- 使用中はほかの作業を行わない。(ケガや事故の原因)
- 使用する部位にアクセサリなどの装身具をつけたまま使用しない。(ケガや事故の原因)
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
- 不安定な場所に置かない。
また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。
ケガ・本体が故障する原因になります。
- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーなどで本体や付属品を乾燥しない。(部品の変形、故障の原因)
- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。(故障・感電の原因)
- 湿ったままの状態で充電台にのせたり、放置しない。(におい・変色・故障の原因)

警告



禁止

充電池について

- 本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。
 - ・加熱や火中投下
 - ・高温環境でのご使用、充電、放置
 - ・こたつや布団に入れてのご使用、充電
 - ・毛布などを被せてのご使用、充電
 - ・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所での使用、充電、放置
- 性能の劣化したりリチウムイオン電池を使用しない。
性能の劣化したりリチウムイオン電池の使用を続けると、発煙・発火など重大な事故につながる恐れがあります。
- 下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
 - ・電池の膨張・異音・異臭

警告



禁止

- 充電しても動作しない
- 極端に使用時間が短くなった
- 充電中に熱くなる

電源について

- 充電台は防水仕様ではないため、浴室内での充電は絶対にしない。(感電、ショートによる火災の原因)
- USBコードを破損するようなことはしない。(感電、ショートによる発火の原因)
傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重い物をのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する。
- ACアダプタをコンセントから抜くときは、USBコードを引っ張ったり、巻き付けたりしない。(感電、ショートによる発火の原因)
- 傷んだり、コンセントへの挿し込みがゆるいACアダプタは使用しない。

警告



必ず守る

- 本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。(感電やショートによる火災などの原因)
- 使用中に身体に異常や肌に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合、使用を中止し、不快感が続く場合は医師に相談する。(事故・体調不良の原因)
- 歯の治療を受けている人は、使用を控えるか部位をずらして使用する。歯の治療中は、頬やあごに刺激を強く感じたり、違和感を感じる場合は医師に相談する。
- 使用前に必ず製品に損傷、変形、汚れがないかを確認し、異常が発見された場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談する。(ケガ・事故の原因)
- 付属の充電台は本製品専用のため、他の製品には使用しない。
- しばらくご使用にならなかった場合は、必ず使用前に操作ボタンやランプ表示、タイマーが正常に動作するか確認する。

警告



ぬれ手禁止

- 濡れた手でACアダプタの抜き差しはしない。(感電や事故の原因)
- 濡れた手で充電端子や充電用ジャックには触れない。(感電や事故の原因)



分解禁止

- 分解・改造は絶対しない。(発火、事故、故障の原因)
- 内蔵充電電池の交換は危険を伴うため、絶対に行わない。(発火、事故の原因)

注意



禁止

- オイル、スクラブなど刺激の強いものとは併用しない。(頭皮のトラブルや故障の原因)
- 次の方は使用しない。(髪の毛がからみつき、髪を傷める原因)
 - ・植毛をされている方・部分かつらを装着中の方
- 赤色LED光を直接のぞき込まない。(目を傷める原因)

注意



禁止

- EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げず、レベルは少しずつ調整する。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。サウナなど高温多湿になる場所では使用しない。(においや変色・故障の原因)
万一、入浴剤入りのお湯などに浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
- アタッチメントは軽く当てるようにして、強く押し付けたり、早く動かしたりしない。(ケガ・本体故障の原因)
- 過度に1か所に集中して使用しない。(肌を傷める原因)



必ず守る

- 使い始めや慣れるまでは必ず弱い刺激から開始する。
- 肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。また、肌が十分に湿った状態になるように随時水などを補充する。(頭皮や肌を傷める原因)
- 1部位1回約10分、1日合計20分を目安に使用する。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤、化粧水やジェルなどを使用した場合は、必ず本体を水洗いする。(本体の変色・変質や、塗装がはがれる原因)

注意



必ず守る

- 必ずすべてのアタッチメントを取り付けてから使用する。
- アクセサリ類（ネックレス・イヤリング等）は外してから使用する。（事故やケガの原因）
- 髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてから、からんだ髪の毛を外す。
- 使用後は必ず本体の汚れ・水分をしっかりと拭き取る。（ぬれたままの状態では放置すると、充電端子が腐食する原因）

電源について

- AC100Vで使用する。（火災、故障の原因）
- アダプタジャックなどにピンのような鋭いものや異物を挿し込まない。（発火や感電、事故の原因）
- 電源プラグは根元まで確実に挿し込む。（感電や発熱による火災の原因）
- 充電用ジャックなどにピンやごみを付着させない。（感電やショートによる火災の原因）

注意



必ず守る

- 異常・故障時に直ちに使用を中止する。ACアダプタ使用時は、コンセントからACアダプタを抜く。(発煙、発火、感電の原因)
＜異常・故障例＞
本体、ACアダプタ、コードが
 - ・変形したり、異常に熱い
 - ・異常音や異臭・煙発生すぐにドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- お手入れの際は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。(感電の原因)
- 停電時は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。(思わぬ事故の原因)
- 使用時以外は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。(湿気やほこりで絶縁劣化になり、漏電・火災の原因)
- 雷が鳴り始めたら、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

注意



必ず守る

●安全装置


アタッチメントを強く押し付けたり、髪の毛がからみつくなどが原因で、一定の負荷がかかると、安全装置が働き、動作が停止し、電源がオフになります。その際は、再度電源ボタンを押して電源をオンにしてください。

●防水機能


本体は防水仕様 (IPX7) になっています。シャワーやお風呂中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。充電台は防水仕様ではありません。

各部の名称と付属品

本体

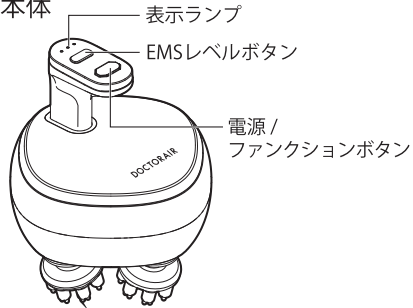


本体 (裏)

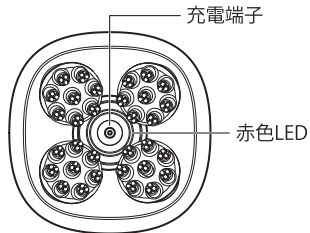

付属品

・充電台

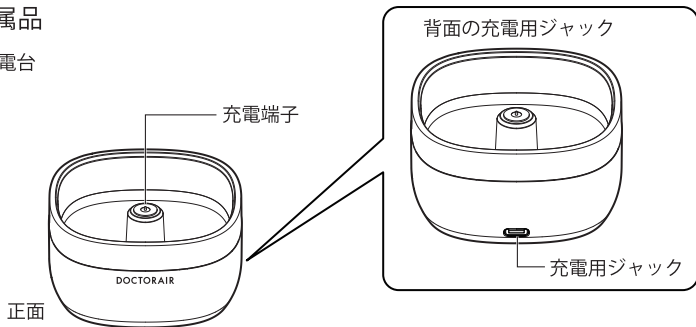

※充電台は防水仕様ではありません。水がかからない場所で保管し、ぬれた状態での使用や、浴室での充電は絶対にしないでください。

・アタッチメント3種類（消耗品）

スタンダード
アタッチメント×4
（本体に取り付け済）



ソフト
アタッチメント
×4



ニードル
アタッチメント
×4



・USBコード
（TYPE-C（A to C））



・取扱説明書
（保証書別紙）



※アタッチメントは消耗品です。摩耗した場合は、新しいアタッチメント（別売）に交換してください。

電源 / ファンクションボタン

長押し（約1.5秒）で電源のオン/オフを切り替えます。

短押しで3モードを切り替えます。

低速 → 高速 → ストレッチ →

低速……の繰り返し

EMSレベルボタン

押すたびに、EMSを1 ～ 3段階で調節します。

表示ランプ

＜EMS機能動作中＞

EMSレベルに合わせ、点灯数が変わります。

※●消灯、○点灯、◎点滅

EMSレベル	ランプ表示
レベル1	○●●(1つ白点灯)
レベル2	○○●(2つ白点灯)
レベル3	○○○(3つ白点灯)
EMSオフ	●●●(3つ消灯)

＜充電中＞

充電中、電池残量に応じて、点灯数が変わります。

※●消灯、○点灯、◎点滅

電池残量	ランプ表示
少	◎ ● ●
中	○ ◎ ●
多	○ ○ ◎
満充電	○ ○ ○

※満充電になると、表示ランプが全点灯し、約3分間後消灯します。
USBコードを引き抜いた際に、約3秒間表示ランプが点灯します。

ご使用前の準備

充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。


- ご使用前に製品に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- 充電中は動作しません。動作中に充電を行うと、自動的に電源が切れ、充電が開始されます。
- USBコードを束ねた状態で使用しないでください。
- 付属品以外のUSBコードを使用する場合は、定格2.0A以上に対応したコードを必ず使用してください。

- 取扱いを誤ったために生じたACアダプタ等の故障については、当社では責任を負いかねます。


1 本体と充電台の充電端子が触れるように、本体を置きます。

ご注意

必ず本体・アタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。

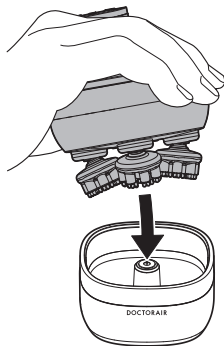

- 2 充電台の充電用ジャック(TYPE-C)に付属のUSBコードをしっかりと挿し込みます。

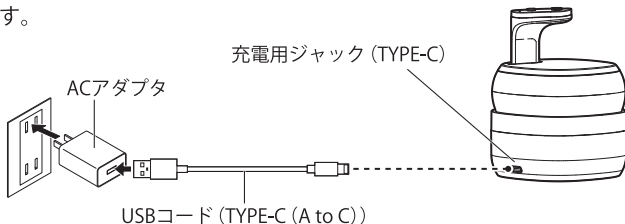

※ACアダプタは付属しておりません。
市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

- 3 USBコードをお持ちのACアダプタに挿し込んで、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。

- ※充電が開始され、表示ランプが点灯し、赤色LEDが約4秒間点灯します。
(22ページをご参照ください。)
- ※市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC5.0V 2.0A以上のACアダプタをご使用ください。
- ※USB PD PPS規格のACアダプタは非対応です。
- ※ご使用になるACアダプタに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプタは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプタの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ※電気用品安全法に適合し、PSEマークが表示された充電器をご使用ください。不正規な充電器を使用すると、充電器や製品が高温になる恐れがあります。

4 充電が完了したら、USBコードを充電台から取り外し、ACアダプタをコンセントから取り外します。

※満充電になると、表示ランプが全点灯し、約3分間後消灯します。USBコードを引き抜いた際に、約3秒間表示ランプが点灯します。

※空の状態から充電完了まで約2時間かかります。

ドクターエア EMSスカルプSPAを使用する

ご使用になる前に

ご注意

- ご使用前に各ボタンやランプ、各機能などが正常に動作することを確認してください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。くわしくは「充電する」(23ページ)をご覧ください。
- 本体やアタッチメントの表面に異物が付着していないか、割れや傷がないことを確認してください。
- EMS(電気刺激)を通電させるために、アタッチメントにカーボン(炭)を配合しています。お肌や物にこすりつけると黒く汚れる場合がありますのでご注意ください。衣類の上からの使用をお避けください。



使用方法

- 1 スタンダードアタッチメントは本体に取り付けられています。アタッチメントを交換する際は、確実に奥まで挿し込んで取り付けてください。

※アタッチメントは強く引っ張ると破損することがありますので注意してお取り扱いください。

- 2 本体をしっかりと持ちます。

※手についたシャンプーや石鹸などをよく洗い流してから持ってください。滑って落とさないようご注意ください。ケガ・故障の原因になります。

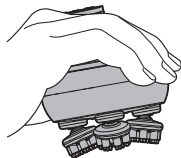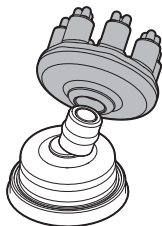

- 3 電源ボタンを押します。「低速＋赤色LED」モードが開始されます。
- 4 モード切替ボタンを押して、モードを切り替えます。
- ①低速＋赤色LED → ②高速＋赤色LED → ③ストレッチ＋赤色LED →
①低速＋赤色LED……の繰り返し
- ※使いはじめや慣れるまでは、必ず低速モードから使用してください。
※動作中にモードを切り替えてもタイマーはリセットしません。
- 5 EMSレベルボタンを押して、EMSレベルを調節します。EMSレベルに合わせて、LEDの点灯数が変わります。(21ページ参照)
- OFF → レベル1 → レベル2 → レベル3 → OFF……の繰り返し
- ※使いはじめは必ずレベル1から使用してください。
※アタッチメント全体が頭皮に垂直にあたるように使用してください。

※EMSの刺激を感じないまたは刺激が弱い場合、肌に密着していない可能性があります。密着している場合、レベルを調節するか、水またはぬるま湯で肌を湿らせてください。

※EMS機能のみでの使用はできません。

※動作中にEMSレベルを切り替えてもタイマーはリセットしません。

- 6 電源がオンになってから約5分経過すると、自動的に動作が停止し、電源がオフになります。

※途中で電源を切るには、電源ボタンを長押しします。

お手入れと保管について

お手入れについて

- お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
 - シャンプーやトリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いしてください。本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因になります。
 - 本体やアタッチメントについている髪の毛や汚れを水で洗い流してください。その後、タオルなどの乾いた布で水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ※アタッチメントがカーボン（炭）を配合しているため、汚れが気にならない布でふき取ってください。

- ・アルカリ洗剤・除光液・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管について

- ・アタッチメントを紛失しないように、袋などに入れて保管してください。
- ・USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- ・汚れやほこりをよく拭き取り、お風呂や洗面所などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。また、浴室など高温多湿の場所に放置せず風通しの良い日陰で保管してください。
- ・乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。

- ・長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、箱に入れて保管してください。

廃棄する場合は

本製品はリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

故障かなと思ったら

電源を入れても動作しない	• 充電が切れている場合があります。充電を行ってください。 • 充電中は電源ボタンを押しても電源が入りません。充電を終了させてください。
突然停止した	• 約5分で自動停止します。 • 電池残量が少ない可能性があります。充電してください。 • 一定の負荷がかかると、安全装置が働き、動作が停止し、電源がオフになります。その際は、再度電源ボタンを押し、電源をオンにしてください。

充電できない、
充電しても電池
持続時間が短い

- 周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境下で充電を行ってください。
- 初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻ります。
- 動作中にUSBコードを接続しても充電されません。電源オフの状態で充電されます。
- 本体と充電台の充電端子が正しく触れているかを確認してください。
- ACアダプタで充電する場合は、定格出力DC5.0V 2.0A以上を必ず使用してください。
※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応です。
- 付属品以外のUSBコードを使用する場合は、定格2.0A以上に対応したコードを必ず使用してください。

EMSの刺激を感じない、刺激が弱い	• 肌に密着させてください。 • EMSレベルを調節してください。 • 電池残量が少ないので、充電してください。 • 肌が乾燥している可能性があります。水またはぬるま湯で肌を湿らせてください。
お風呂で使用中に水泡が出てくる	• 異常ではありません。
お風呂で使用后、本体を振ると水の入った音がする	• 異常ではありません。 水分をよくふき取り、風通しの良い場所で乾燥させてください。
使用時に製品から音がする	• 本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。 異常ではありません。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

製品名	ドクターエア EMSスカルプスパ
型番	BSC-01
電源	充電式（リチウムイオン充電電池内蔵3.7V、650mAh）
定格消費電力※1	7.5W以下（動作時）、5.0W以下（充電時）
充電時間※1	約2時間
対応ACアダプタ※2	定格出力：DC5.0V 2.0A以上使用すること

※1 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。

※2 ACアダプタは付属していません。

市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

寸法	W81.5×D81.5×H100mm (アタッチメント装着時) W81.5×D81.5×H111.5mm (充電時)
質量	約230g (本体のみ) 約60g (充電台のみ)
付属品	スタンダードアタッチメント×4 (本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード (TYPE-C (A to C))、取扱説明書 (保証書別紙)
材質	本体：ABS、PC 充電台：ABS、PC、シリコン アタッチメント：シリコン
使用環境温度	+10℃～+40℃
生産国	中国

保証とアフターサービス

使い方・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。
また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(35ページ)をご確認ください。
直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

・お買い上げ日

修理に関する
お問い合わせ



- 製品型名：BSC-01
- 故障の状況（できるだけ具体的に）

保証期間内に修理を依頼される場合は
保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間：保証書に記載

保証期間終了後は
診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料：診断、修理、調整、点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃：修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。

保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

定期点検のお願い

本製品の定期点検をお願いします

こんな症状はありませんか？

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- USBコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 内部に異物や水が入った
- 本体に変形や破損がある
- その他異常がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口にて点検、修理をご相談ください。

