
DOCTORAIR

100

取扱説明書
添付文書

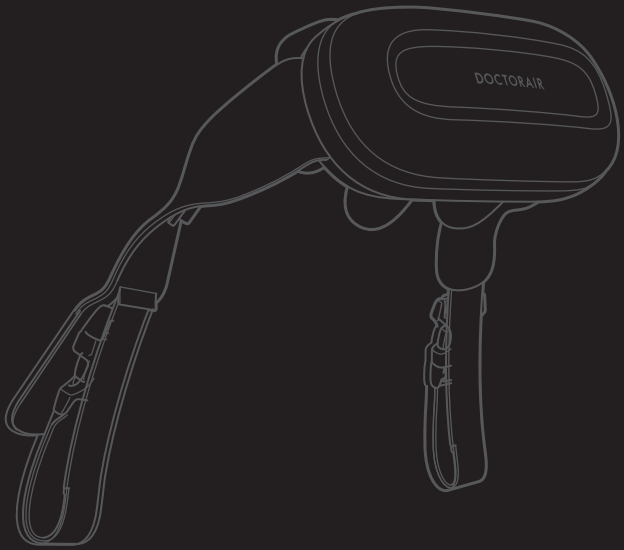

3Dネックマッサージャープレミアム SMART

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

安全のために ……3
各部の名称と機能 ……10
充電する ……13
本製品を使用する ……16
お手入れと保管について ……24
故障かなと思ったら ……28
主な仕様 ……30
保証とアフターサービス ……32

安全のために

安全上のご注意

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について 誤った取扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。	
⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例 お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
	してはいけないこと。
	必ず行うこと。

⚠警告

禁止

●医師からマッサージを禁止されている方は使用しない。（事故・ケガ・体調不良の原因）
●次の方は使用しない。（事故・ケガ・体調不良の原因）
・心臓疾患の方・急性疾患の方・悪性腫瘍の方・血圧異常の方・血栓（塞栓）症、重度の動脈硬化の方・ 妊娠中や妊娠の可能性がある方・出産直後の方・化学繊維でかぶれた経験のある方
・健康が特にすぐれない方・疲労が激しい方など
●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させない。（事故・ケガの原因）
●使用中はほかの作業を行わない。（事故・ケガの原因）
●アクセサリーなどの硬いものやベルト、マフラー、首元に装飾のある服などを着用して使用しない。（事故・ケガの原因）
●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、AC100V以外での使用はしない。（火災の原因）
●乳幼児や小さなお子様に本製品を使用させたり、遊ばせたりしない。（事故・ケガの原因）
●ストーブなどの火気のそばやホットカーペットの上で使用しない。（火災・故障の原因）
●タバコを吸いながら使用しない。（火災・故障の原因）
●こたつの中や暖房器具の近く、ホットカーペットの上で使用しない。（事故・感電の原因）
●本体のカバーを故意に外したり、破いたり、切ったりしない。（事故・ケガの原因）
●本体や充電用ジャック（TYPE-C）の隙間に、ピンのように鋭いものや異物を挿し込まない。（火災・感電・故障の原因）
●USBコードを本体やACアダプタに巻き付けない。（断線による火災・感電の原因）

⚠警告

禁止

●USBコードおよびACアダプタを破損するようなことはしない。（火災・感電の原因）
・傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじ曲げる、束ねて使用する、重いものをのせる、はさみこむ
●USBコードを充電ジャック（TYPE-C）またはACアダプタから抜くときは、引っ張らない。（絶縁不良になり、火災・感電・ショートによる発火の原因）
●首の周辺をマッサージするときは特に注意し、首の前方には使用しない。（事故・ケガの原因）
●次の部位には使用しない。
・整形手術をした部位
・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
・皮膚トラブルのある部位 例：アトピー性皮膚炎、顔面黒皮症、皮膚の炎症、かゆみやほてりのある部位、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など
・痛覚、知覚障害を起こしている部位・胸部・脇部・骨折部位・関節部位

充電池について

●本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。
・加熱や火中投下
・高温環境でのご使用、充電、放置
・こたつや布団に入れてのご使用、充電
・直射日光が当たる場所や、炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電
●性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。
性能の劣化したリチウムイオン電池の使用を続けると、発煙・発火など重大な事故につながるおそれがあります。電池の性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
●下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口まで相談する。
・電池の膨張・異音・異臭
・充電しても動作しない
・極端に使用時間が短くなった
・充電中に熱くなる

⚠警告

禁止

電源について
●濡れた手でACアダプタをコンセントから抜き差ししない。（感電の原因）
●電源プラグ・USBコードを破損するようなことはしない。（感電、ショートによる発火・火災の原因）
傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重いものをのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する
●ACアダプタが傷んだり、コンセントへの挿し込みがゆるいときは使用しない。

必ず守る

●次の方は必ず医師と相談の上、使用する。
- 温度感覚喪失が認められる方
- 糖尿病など、高度の末しょう循環障害による知覚障害のある方
- 治療部位に創傷のある方
- 安静を必要とする方や体力の衰えた方
- 体温38℃以上（有熱期）の方
例：急性炎症症状（倦怠期、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき
- 骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れの急性（疼痛性）疾患のある方
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 腱鞘炎、むち打ち症、頚椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの方
- 背骨に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方
- 医師の治療を受けている方や、上記以外に特に身体の異常を感じている方

●使用前に布地が破れていないか必ず確認する。どんなに小さな破れでも見つけた場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談する。（ケガ・事故の原因）
●使用中に身体に異常があらわれたり感じたりした場合や、使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。（事故・体調不良の原因）

⚠警告

必ず守る

●USBコードのコネクタやACアダプタは根元まで確実に挿し込む。（感電や発熱による火災の原因）
●使用前に操作ボタンが正常に動作することを確認する。しばらく使用しなかった場合も必ず確認する。
●指定の電源、電圧で充電する。（火災・やけど・感電の原因）
充電する際はACアダプタやUSBコードの使用をお確かめのうえ、必ず指定のものを使用してください。取扱いを誤ったために生じたACアダプタなどの故障については弊社では責任を負いかねます。

電源プラグを抜け

●異常・故障時にはただちに使用を中止し、本体の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く。（発煙、発火、感電の原因）
異常・故障例：
本体、USBコードが傷んでいたり、変形したり、異常音や異臭・発煙、異常に熱い場合、直ちにドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。（故障の原因）
●雷が鳴り始めたらただちに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。（故障の原因）
●お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。（感電の原因）
●使用時以外は電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。（思わぬ事故の原因）

ぬれ手禁止

●濡れた手で本体や、電源コードおよびACアダプタに触れない。（感電・故障の原因）

風呂、シャワー室での使用禁止

●本製品は防水仕様ではないため、風呂場や洗面所では使用しない。（漏電による感電・発火の原因）

分解禁止

●分解・改造・修理は絶対にしない。（発火・事故・故障の原因）
内蔵されたリチウムイオン電池の交換は危険を伴いますので、絶対に行わないでください。

⚠注意

禁止

- ●用途以外の目的で使用しない。(ケガ・体調不良の原因)
- ●湿疹が出ている時は使用しない。
- ●使用時間は1回10分以内としてください。
  また、同一箇所への連続使用は5分以内とし、使用部位を適宜変更してください。(逆効果・ケガの原因)
- ●マッサージ以外の目的で使用しない。(ケガ・体調不良の原因)
- ●他の治療器と同時に使用しない。(事故・体調不良の原因)
- ●本体の上にのったり、立ったりしない。(ケガ・故障の原因)
- ●使用中に眠らない。(事故・ケガの原因)
- ●本製品を落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えたりしない。(火災や感電、故障の原因)
- ●使用中、もみ玉に故意に強く押し当てるなどの無理な力をかけない。(ケガ・体調不良・故障の原因)
- ●飲酒中や飲酒後に使用しない。(事故・ケガの原因)
- ●使用中にほかの作業を行わない。(事故・ケガの原因)
- ●直接肌に触れての使用はしない。(ケガの原因)

必ず守る

- ●電源タップを使用する際は、必ず定格容量を守る。(火災・焼損の原因)
- ●食前・食後は十分に時間を置いてから使用する。(体調不良の原因)
- ●使い始めは一番弱い刺激でマッサージを行う。
- ●使用後は電源が切れていることを確認し、ACアダプタをコンセントから抜く。

性能及び安全性に関する規格

性能

項目	仕様	備考
もみ回数：もみ機能をもつ機器	低速：21 回／分 (±3回) 通常：31 回／分 (±3回)	試験方法：JIS T2002

その他の性能

項目	仕様	備考
タイマー	10 分(±10%)	試験方法：JIS T2002


使用目的又は効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

※上記以外の目的には使用しないでください。


各部の名称と機能

本体

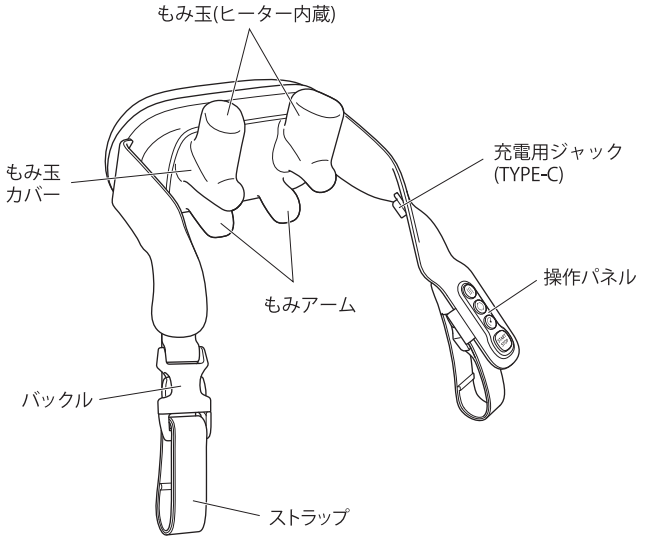

※もみ玉カバーは洗濯可能です。お手入れ方法はもみ玉カバーについている洗濯表示タグをご確認ください。
※本体は洗濯不可です。お手入れ方法は24ページをご確認ください。
※もみ玉カバーを外した状態で使用しないでください。

操作パネル

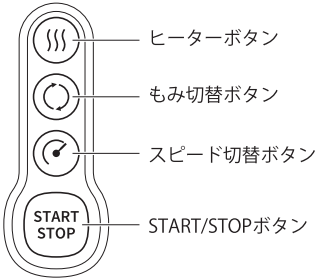


ヒーターボタン
押すたびにヒーターのON／OFFが切り替わります。

もみ切替ボタン
押すたびにもみ玉の回転方向および動作が切り替わります。

スピード切替ボタン
押すたびにもみ玉の回転スピードが切り替わります。

START/STOPボタン
短押しでマッサージがスタートし、短押しでマッサージがストップします。


付属品

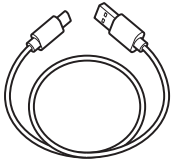

USBコード
（TYPE-C（A-C））



取扱説明書
（保証書付）

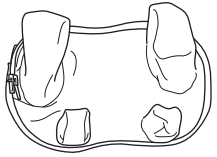


もみ玉カバー
（本体取付済）

充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

●充電中は動作しません。動作中に充電を行うと、自動的に電源が切れ、充電が開始されます。
●初めての充電や長期間ご使用にならなかった後に充電する場合、電池持続時間が短い場合があります。
●以下の症状が確認された場合は、ご使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- ご使用前に、本体や付属品に損傷がないかをご確認いただき、異常が発見されたとき
- 充電を行っても十分に充電できないとき
- 電池持続時間が短いとき

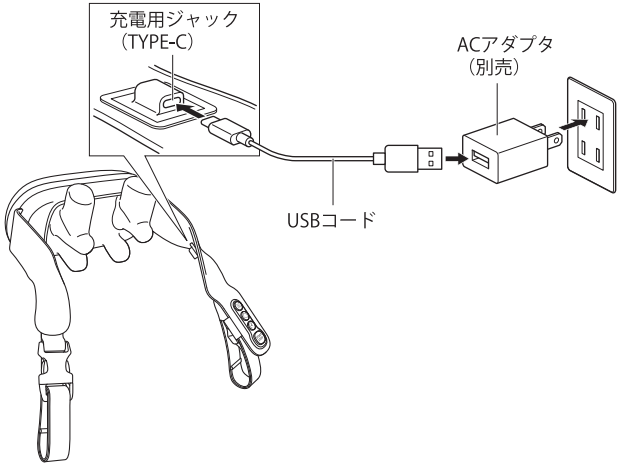

※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。
- 充電が開始されると、もみ玉のLEDが青色に点灯し、満充電になるともみ玉のLEDは消灯します。
- 電池残量が少なくなると、もみ玉のLEDは青色に点滅します。

※充電中は動作しません。

1 USBコード（TYPE-C(A-C)）を本体の充電用ジャック（TYPE-C）に接続します。
奥までしっかりと挿し込んでください。

2 USBコード（TYPE-C(A-C)）をお持ちのACアダプタに挿し込んで、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。

ご注意
- 市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC5.0V 2.0A以上のACアダプタを必ず使用してください。
  ※USB PD PPS規格のACアダプタは非対応です。
- ご使用になるACアダプタに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプタは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプタの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 電気用品安全法に適合し、PSEマークが表示された充電器をご使用ください。
  不正規な充電器を使用すると、充電器や製品が高温になる恐れがあります。
- 充電した状態で外出はしないでください。
- 充電は、なるべく製品の様子が確認できる時間と安全な場所で行い、充電が完了したらプラグを抜いてください。また、充電コネクタの破損や異物の付着にも注意してください。
- UL認証番号が印字されているUSBコードを必ず使用してください。

3 充電が完了したらUSBコード（TYPE-C(A-C)）を本体と充電器の両方から外してください。


本製品を使用する

ご使用になる前に

- ご使用前に、START/STOPボタンやタイマー機能が正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。
- ご使用前に、必ず布地が破れていないか、ファスナーが開いていないかを確認してください。どんな小さな破れでも、見つけた場合は絶対に使用しないでください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。くわしくは「充電する」（13ページ）をご覧ください。
- 機器を連続して動作させるような使い方はおやめください。
- もみ玉カバーを外した状態で使用しないでください。もみ玉カバーが破れた場合は使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
- 開梱時は手持ちで使用できるよう、バックルが固定された状態になっています。手持ちで使用する場合は、バックルを外さずにご使用ください。

手で持って使用する場合


※開梱時のストラップの長さが合わない場合は、ストラップの長さを調整し、ご自身にとって使いやすい長さに合わせてから使用してください。
※詳しくは「ストラップの長さを調整する」（19ページ）をご覧ください。

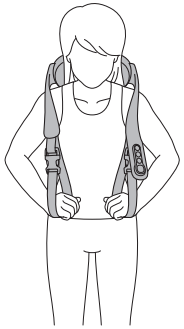

ハンズフリーで使用する場合

1 左右のバックルをはずしてから、本体を使用部位に当てます。外したバックルを体の前に揃え、両手で持ちます。

2 ストラップをひねらないようにバックルを背中に回し、カチッと音がするまで差し込みます。

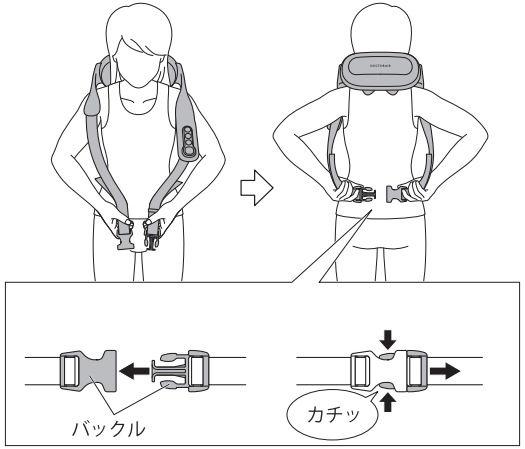


3 ストラップを引っ張って固定します。

ストラップが緩いと感じた場合は、下のイラストのように左右のストラップを交互に引っ張ると、しっかりと固定することができます。

ご注意

• 圧迫しすぎないようにご注意ください。

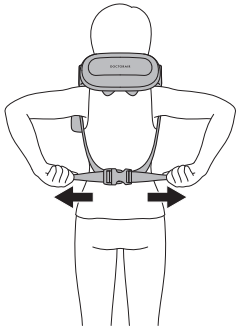


ストラップの長さを調整する

※バックルを外した状態で、ストラップの長さを調整してください。

ストラップを短くする

1 バックルをストラップに対して垂直にします。


2 バックルを持ち、ストラップの端を矢印の方向に引っ張ります。

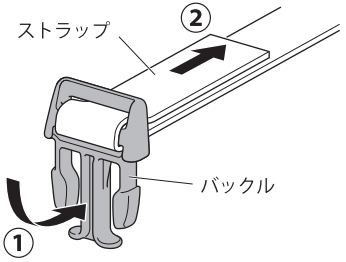

ストラップを長くする

1 バックルをストラップに対して垂直にします。

2 ストラップを持ち、バックルを矢印の方向に動かします。

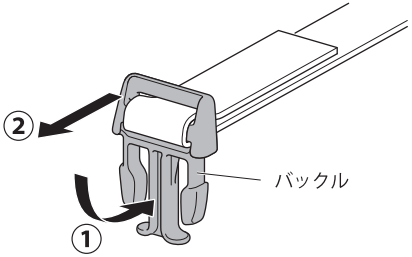

※イラストは、差し込み側のバックルが付いたストラップの例です。
受け側のバックルが付いたストラップの場合は、左右が逆になります。

マッサージを行う

1 START STOPボタンを押して、電源を入れます。
もみ玉が下方向に回転し、マッサージが開始します。もみアームはもみ玉の回転スピードと連動して、上下に動きます。

もみ玉の回転方向と動作を変更する

ボタンを押して、もみ玉の回転方向と動作を切り替えます。
押すたびに次のように動作が変わります。
もみ下げ→もみ上げ→指圧→もみ下げ…

- 「指圧」モードでは、もみ玉が掴むタイミングで約1秒停止し、その後に再びもみ動作を再開します。"グイッ"と押し込まれるような刺激を体感できます。



もみ玉の回転スピードを変更する

ボタンを押して、もみ玉の回転スピードを切り替えます。
押すたびに次のようにスピードが変わります。
通常→低速→通常…

ヒーターのオン/オフを切り替える

ボタンを押して、ヒーターのオン／オフを切り替えます。
- ヒーターオン：もみ玉 赤色点灯
- ヒーターオフ：もみ玉 青色点灯

2 本体を使用したい部分に当て、マッサージをします。ご使用の際はストラップを持つと便利です。

ご注意

- 使い始めは弱い刺激（低速）から開始してください。
- 首周辺をマッサージする際は、強く押し当てないよう十分に注意してください。また、首の前方・頭部・胸部・陰部には使用しないでください。
- マッサージ器本体の上に立ってご使用になったり、全体重がかかるようなご使用はおやめください。
- 髪の長い方がご使用する際は、髪を束ねるなどしてマッサージ器に髪がかからないようにしてください。マッサージ器との摩擦や擦れなどにより、髪の毛をいためる恐れがあります。

約10分後に自動でマッサージが終了します。
途中でコースを切り替えても、約10分で停止します。

途中でマッサージを終了するには

START STOP ボタンを押してください。

ご使用中にもみ玉のLEDが点滅したら

電池残量が少なくなっています。すぐに充電を行ってください。

安全装置について

本製品は安全のため、内部に安全装置を有しております。安全装置は主に次の場合に作動し、電源が自動で切れます。
- 連続使用などにより、モーターやACアダプターの内部温度が規定より高くなった場合
- もみ玉など（施療部）に高い負荷がかかった場合
- 安全上で何らかの異常を感知した場合

安全装置は、モーターやACアダプターの内部温度が正常な状態になると、再度使用が可能となります。ご使用中に動作が停止し、電源ボタンを押しても作動しない場合は、1時間程度経過した後に再度電源を入れてください。

お手入れと保管について

お手入れについて

ご注意

- お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- もみ玉カバーを洗濯する際は、もみ玉カバーに付いている洗濯表示タグをご確認ください。


ご使用後、本体に汗が残らないよう、やわらかい布でしっかりと拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水で濡らして固く絞ったスポンジや、やわらかい布で拭き取ってください。その後、乾いた布で乾拭きしてください。

もみ玉カバーについて

もみ玉カバーは取り外すことができます。汚れなどが気になるときは、取り外して洗濯してください。


もみ玉カバーを取り外す

施術部の周りのファスナーを開け、もみ玉カバーを取り外します。

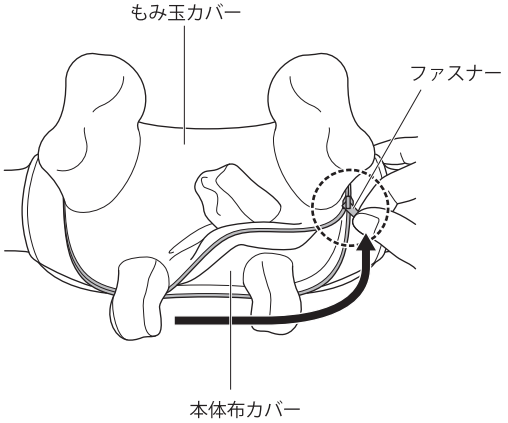

もみ玉カバーを取り付ける

施術部にもみ玉カバーを取り付け、ファスナーを締めます。

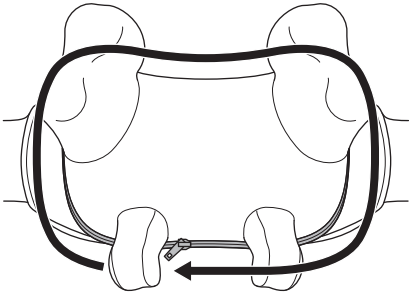

保管について

- 保管の際は、必ず電源を切ってください。
- 汚れやほこりをよく拭き取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所で保管しないでください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
- USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- 製品を安全な場所で使用・保管しましょう。

廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	• 安全装置が作動している場合があります。１時間ほど置いてから再度お試しください。 • 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
もみ玉の動きが遅い・弱い	• 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	• 周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境下で充電を行ってください。 • 初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻る場合があります。 • ACアダプタで充電する場合は、定格出力DC5.0V 2.0A以上を必ず使用してください。 ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応です。 • 付属品以外のUSBコードを使用する場合は、定格2.0A以上に対応したUL認証番号が印字されているUSBコードを必ず使用してください。
突然停止した	• タイマーにより約10分で自動的に停止します。 • もみ玉に負荷がかかったり内部温度が上昇すると、安全装置により動作が一時停止します。１時間ほど置いてから、再度お試しください。

症状	確認していただくこと
もみ玉のヒーターが温まらない	• お使いになる環境によっては、ヒーターが最高温度に達しない場合があります。 • 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
使用時に製品から音がする	• 本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

製品名	3Dネックマッサージャープレミアム SMART
型番	MN-10
種別	機械器具 77 バイブレーター
一般名称	【家庭用電気マッサージ器】
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	308AHBZX00014000
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用。 一般家庭で使用すること。
電源	充電式リチウムイオン電池内蔵 DC 7.2V 2000 mAh
定格入力	AC100 V 50Hz/60HZ
定格消費電力	17.7W(ヒーターのみ2.6W)
充電時間	約3時間（満充電まで）
定格仕様時間 (タイマー時間)	約10分
充電可能回数	400回
もみ回数	通常：31 回 / 分 (± 3 回)
	低速：21 回 / 分 (± 3 回)
ヒーター使用時の 生地カバーの表面 温度	42℃(±3℃)環境温度25℃換算

騒音	55dB 以下
寸法	W255× D145× H135㎜
質量	1.2kg 以下
材質	ABS樹脂、ポリエステル、 スパンデックス、ポリアセタール、ナイロン
付属品	USBコード（TYPE-C（A-C））、 取扱説明書（保証書付）、もみ玉カバー(本体取付済)
使用環境温度	10 ～ 40℃ 、10 ～ 85% R.H. 以下
保存環境温度	ー 10℃～＋ 60℃、85% R.H. 以下
生産国	中国

※実際の時間および回数・温度は、使用状況・使用環境により異なります。
※電池残量によって回転数が変わる事があります。
※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。
※USBコードに関するご注意
本製品は医療機器のため、必ず下記の指定USBコード (UL適合品) のみをご使用ください。
・指定USBコード：UL認証番号が印字されているUSBコード

指定以外のUSBコードを使用した場合、正常に動作しないほか、火災・感電・故障の原因となるおそれがあります。
また、指定以外のUSBコードの使用により生じた不具合または事故については、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

USBコードを紛失または破損した場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。
また内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」（28ページ）をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源コードを外し、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

修理に関するお問い合わせ

- お買い上げ日
- 製品型名：MN-10
- 故障の状況（できるだけ具体的に）

保証期間内に修理を依頼される場合は
保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。
保証期間：保証書に記載

保証期間終了後は
診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃：修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

海外でのご使用について

海外でのご使用は保証対象外です。使用環境や電源条件によるトラブルについて、当社は一切の責任を負いかねます。

公共交通機関で使用する場合

事故を避けるため、持込規則を確認し、規則に従ってください。

定期点検のお願い

本製品の定期点検をお願いします

こんな症状はありませんか？	ご使用中止
●煙が出たり、異常なにおいや音がする ●USBコードを動かすと、通電したりしなかったりする ●内部に異物や水が入った ●本体に変形や破損がある ●その他異常がある	故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口に点検、修理をご相談ください。