
イヤラボ mini

EAR LABO MINI / SEL-02ME

｜ 取扱説明書 ｜

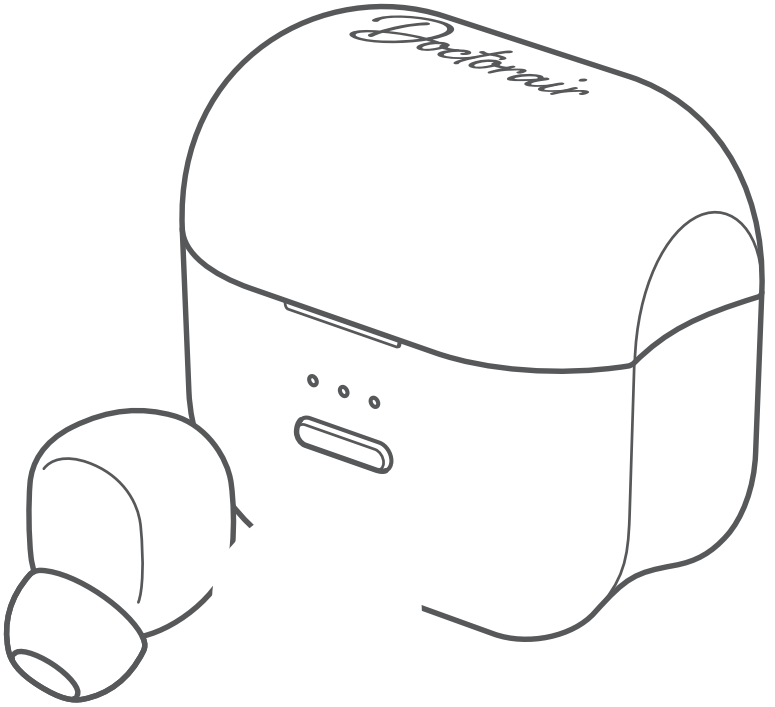

このたびはドクターエアME製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

Doctorair
ME

095

目次

安全のために ……3
各部の名称と付属品 ……9
充電する ……14
本製品を使用する ……16
お手入れと保管について ……19
故障かなと思ったら ……21
主な仕様 ……23
保証とアフターサービス ……25

安全のために

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について 誤った取扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。	
⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例 お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
 禁止	してはいけないこと。
 必ず守る	必ず行うこと。

⚠警告

禁止

●次の方は使用しない。
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 温度感覚喪失が認められる方
- 睡眠薬等を服用した方及びぼいてい状態の方
- 耳に疾患のある方、耳周りにトラブルがある方

●次の方は必ず医師とご相談の上使用する。
- 悪性腫瘍のある方
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方
- 安静を必要としている方や体調がすぐれない方
- 体温38℃以上(有熱期)の方
- 例：急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき
- 適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある方
- その他、医療機関で治療中の方
- 低温やけどをしたことのある方

●下記の場合や、耳以外の部位には使用しない。(体調不良、肌トラブルの原因)
- 体調がすぐれないとき、発熱しているとき
- 使用する部位に傷、湿疹、はれものやニキビなど、肌に異常があるとき
- 皮膚炎、過度の日焼けなど肌に異常のある時
- 外科手術(形成・美容など)を受けた部位

●乳幼児や小さなお子様の手の届く場所、ペットが触れる場所に保管しない。(誤飲など思わぬ事故を招く原因)

●浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しない。(感電の原因)

●本体は水洗いしない。(感電やショートによる火災などの原因)

●電子レンジや乾燥機などで加熱しない

⚠警告

禁止

充電池について

●本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。
- 加熱や火中投下
- 高温環境でのご使用、充電、放置
- こたつや布団に入れてのご使用、充電
- 毛布などを被せてのご使用、充電
- 直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電、放置

●性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。
性能の落ちたリチウムイオン電池を無理に使用すると、重要な事故につながるおそれがあります。電池性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
*使用できる時間が短くなった・充電できなくなったなど

●下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口まで相談する。
- 電池の膨張・異音・異臭
- 充電しても動作しない
- 極端に使用時間が短くなった
- 充電中に熱くなる

⚠警告

 必ず守る	●使用前に必ず製品に損傷、変形、汚れがないかを確認し、異常が発見された場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口に相談する。(ケガ・事故の原因) ●しばらくご使用にならなかった場合は、必ず使用前に操作ボタンやランプ表示、ヒーター機能が正常に動作するか確認する。 ●使用中、身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は医師に相談する。(事故・体調不良の原因) 電源について ●濡れた手でACアダプタをコンセントから抜き差ししない。(感電の原因) ●電源プラグ、USBコードを破損するようなことはしない。(感電、ショートによる発火・火災の原因) 傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重いものをのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する ●ACアダプタが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。
 分解禁止	●分解・改造は絶対しない。(発火、事故、故障の原因) ●内蔵充電池の交換は絶対しない。(発火、事故の原因)

⚠注意

 禁止	●イヤーピースを外した状態で使用しない。(やけどやケガの原因) ●運転中は使用しない。(思わぬ事故やケガの原因) ●他の製品、機器などと同時に使用しない。(事故・体調不良の原因) ●使用中に眠らない。(事故・ケガの原因) ●飲酒、食事直後の約30分～1時間は使用しない。(健康を害するおそれ) ●本製品を落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えない。(発火・感電・故障の原因) ●医療行為には使用しない。 ●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。(ケガ・故障の原因)
 必ず守る	●イヤーアクセサリー類は外して使用する。(事故・ケガの原因) ●熱いと感じた場合、使用を中止する。(低温やけどの原因) ●連続して使用しない。(低温やけどの原因) ●1日の使用は3回までにする。(逆効果・ケガの原因) ●耳や耳のまわりに湿疹、かぶれ等が現れた場合は、その後の使用を中止し、医師に相談する。 ●熱すぎると感じた場合、痛みや違和感等、身体に何らかの異常を感じた場合はすぐに使用を中止する。(やけど等のトラブルの原因) ●使用しないときは必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。(火災・故障の原因)


⚠注意

必ず守る

電源について
- コンセントや配線器具の定格を守る。(定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 電源プラグ、器具用プラグは根元まで確実に挿し込む。(感電や発熱による火災の原因)
- 本体や電源プラグなどにほこりが付着しないように定期的にお手入れを行う。(湿気、ほこりなどで絶縁不良になり、火災の原因)
- 充電が完了したら、ACアダプタをコンセントから抜く。
- 雷が鳴り始めたら、直ちに充電を中止する。(故障の原因)
- 化粧品などを併用しない。(感電や故障の原因)


各部の名称と付属品

本体(耳せん)

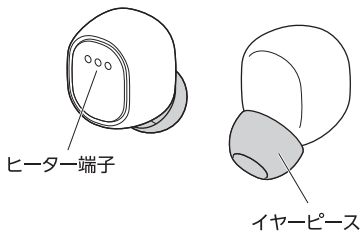


※本体(耳せん)は音楽を聞くことはできません。


充電ケース(前面ー蓋を閉じた状態)

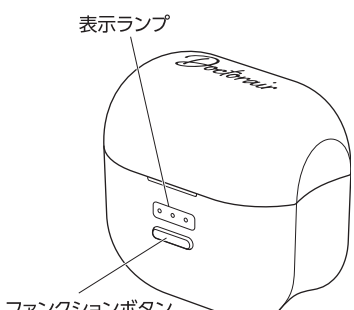

充電ケース（正面ー蓋を開けた状態）

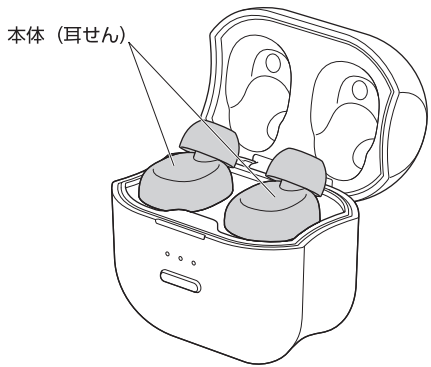

充電ケース（底面）

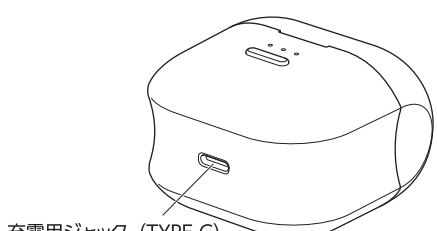

ファンクションボタン

長押し（約1.5秒）で電源のオン/オフを切り替えます。

表示ランプ

電池残量／充電レベル（青色）、ヒーターレベル（赤色）を表示します。

充電用ジャック（TYPE-C）

充電時にUSBコード（TYPE-C（A-C））を接続します。

表示ランプについて

表示ランプは以下の状態を表しています。

電池残量（青色）

電源を入れると、電池残量が約2秒間表示されます。

※● 消灯、○ 点灯

電池残量	ランプ表示
無	●●●
少	○●●
中	○○●
多	○○○

※電池残量が減ると、ランプは右から順次消灯します。

ヒーターレベル（赤色）

電源を入れて約2秒間電池残量が表示された後、前回選択していたヒーターレベルが約3秒間表示されます。

※初めて使用する際は、ヒーターレベルは「弱」に設定されています。

※● 消灯、○ 点灯、◎ 点滅

ヒーターレベル	ランプ表示	
	温め中	温め完了
弱	◎●●	○●●
中	◎●● → ○◎●	○○●
強	◎●● → ○◎● → ○○◎	○○○

※既に本体（耳せん）があたたまっている場合は、現在のヒーターレベルが表示されます。

※ヒーターレベル「強」まで5分以内にあたたまります。


付属品

イヤーピース3種（S、M、L）
※Mサイズは本体（耳せん）に装着済み



Sサイズ　Mサイズ　Lサイズ

USBコード
(Type-C(A to C))

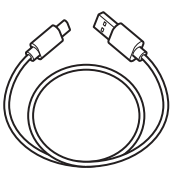

取扱説明書
(保証書付)




充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

ご注意

- ご使用前に本体(耳せん)に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- USBコードを束ねた状態で使用しないでください。
- 市販のUSBコードもご使用になれます。市販品をご使用の際は、必ず「56kΩレジスタ(抵抗)」の実装されたUSB TYPE-A to Cコードを使用してください。
- 取扱いを誤ったために生じたACアダプタ等の故障については、当社では責任を負いかねます。

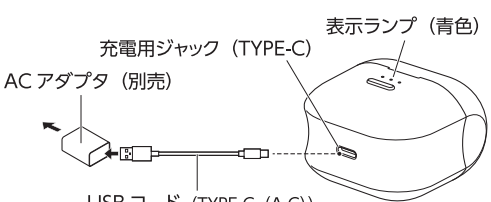

※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

1 充電ケースの充電用ジャック(USB TYPE-C)に、付属のUSBコードを接続します。
※しっかりと挿し込んでください。

2 お持ちのACアダプタにUSBコードを接続し、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。
※充電が開始され、表示ランプが点灯します。(青色)
※空の状態から充電完了まで約1時間かかります。
※市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC5.0V 2.0A以上のACアダプタを必ず使用してください。
※USB PD PPS規格のACアダプタは非対応です。
※ご使用になるACアダプタに損傷がないか確認し、異常があるACアダプタは絶対に使用しないでください。
また、お使いになるACアダプタの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
※電気用品安全法に適合し、PSEマークが表示された充電器をご使用ください。
不正規な充電器を使用すると、充電器や製品が高温になる恐れがあります。
※あたため中に充電はできません。使用方法は16 ページの「本製品を使用する」をご覧ください。

3 充電が完了したらUSBコード(TYPE-C(A-C))を本体と充電器の両方から外してください。
満充電になると、表示ランプが全点灯し、約3分後に消灯します。
USBコードを引き抜くと、表示ランプが点灯します。

本製品を使用する

ご使用になる前に

- ご使用前にファンクションボタンや表示ランプなどが正常に動作することを確認してください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。詳しくは「充電する」(14ページ)をご覧ください。

1 本体(耳せん)を充電ケースにセットします。

2 ファンクションボタンを長押し(約1.5秒)し、電源を入れます。
電源オン後、約2秒間電池残量が表示されます。

3 電源を入れて約2秒間電池残量が表示された後、前回選択していたヒーターレベルが約3秒間表示されます。
※初めて使用する際は、ヒーターレベル「弱」のランプが約3秒間表示されます。

4 ファンクションボタンを押して、ヒーターレベルを調節します。
電源オン時、ファンクションボタンを押すたびに、ヒーターレベルは下記の様に切り替わります。
弱→中→強→弱…の繰り返し

5 ヒーターランプが全点灯したら、本体(耳せん)を充電ケースから取り出し、耳に装着します。
- イヤーピースを取り外した状態で使用しないでください。やけどやケガの原因になります。
- イヤーピースのサイズが合わない場合は、他のサイズに交換してください。

※付け替え方法は18ページを参照してください。





あたたかさは約15分持続します。充電ケースから取り出した後、徐々に常温に近づきます。
※使用環境・使用状況により異なります。

途中で使用を中止する場合

本体(耳せん)を充電ケースに収納してください。
※表示ランプが点灯している場合は、ファンクションボタンを長押し(約1.5秒)すると電源がオフになります。

付属のイヤーピースを付け替える

耳の大きさに合わせて、イヤーピースのサイズを付け替えてください。S/M/Lサイズの3種類付属しています。
※Mサイズは本体(耳せん)に装着されています。
より快適にお使いいただくために、イヤーピースのサイズを変えて耳の収まりが良いものに調節してください。

交換方法

お使いのイヤーピースを外し、取り付けたいイヤーピースを斜めから押し当て、穴を広げるように押し込み、奥まで入るようにしっかりと取り付けてください。

お手入れと保管について

お手入れについて

- お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

本体(耳せん)、充電ケースは乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、柔らかい布で拭き取ります。その後、乾いた布で乾拭きしてください。

保管について

- 保管の際は、必ず電源を切り、USBコードを抜いてください。
- USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- 汚れやほこりをよく拭き取り、お風呂や洗面所などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、お手持ちの袋などに入れて保管してください。

廃棄する場合は

充電ケースにはリチウムイオン充電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
充電できない、 充電しても電池持続時間が短い	• 周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境下で充電を行ってください。 • 初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻る場合があります。 • ACアダプタで充電する場合は、定格出力DC5.0V 2.0A以上をご使用ください。 ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応です。 • 付属品以外のUSBコードを使用する場合は、定格出力DC5.0V 2.0A以上に対応したUSBコードをご使用ください。 • 動作中にUSBコードを接続しても充電されません。電源をオフにすると充電されます。

症状	確認していただくこと
充電できない、 充電しても充電時間が長い	・充電中、本製品の内部が高温になると、安全機能が働き、表示ランプ3つが赤点滅して充電が停止します。その後、本製品の内部温度が適正温度に戻ると、表示ランプの点滅が消灯し、通常の充電状態に戻ります。
ヒーターが温まらない	・充電が十分でない場合、設定温度に達するまでに時間がかかる場合があります。十分に充電を行ってからご使用ください。 ・お使いになる環境によっては、設定温度に達しない場合があります。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

製品名	イヤラボ mini
型番	SEL-02ME
電源	充電式(リチウムイオン充電池内蔵 3.7V 1000mAh)
定格消費電力*1	約3W以下(充電時) 約4W以下(動作時)
充電時間*1	約2時間30分
充電可能回数*1	約300回
あたたかさ持続時間*1	約15分(目安)
寸法	本体(耳せん): 約W23.6mm×H19.2mm× D19.2mm(突起部含む) 充電ケース: 約W58mm×H60mm×D35mm (突起部含む)
質量	本体(耳せん):約10g 充電ケース:約62g
付属品	イヤーピース3種(S/M/L)、USB コード(TYPE-C(A-C))、 取扱説明書(保証書付)
材質	本体:ABS、シリコン 充電ケース:ABS、シリコン

設定温度*1	弱：約38℃ 中：約43℃ 強：約48℃ （環境温度25℃時（温度の目安））
使用環境温湿度	+10℃～+40℃　85% R.H.以下
保管環境温湿度	−10℃～+60℃　85% R.H.以下
生産国	中国
対応ACアダプタ*2	定格出力：DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応

※1　記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。
※2　ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」（21ページ）をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源を切り、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- お買い上げ日
- 製品型名：SEL-02ME
- 故障の状況（できるだけ具体的に）

修理に関するお問い合わせ

保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。
保証期間：保証書に記載

保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料：診断、修理、調整、点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃：修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

海外でのご使用について

海外でのご使用は保証対象外です。使用環境や電源条件によるトラブルについて、当社は一切の責任を負いかねます。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

定期点検のお願い

本製品の定期点検をお願いします

こんな症状はありませんか?	ご使用中止
●煙が出たり、異常なにおいや音がする ●内部に異物や水が入った ●本体に変形や破損がある ●その他異常がある	故障や事故防止のため、電源を切り、乾電池を外して、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口に点検、修理をご相談ください。